



handleiding toiletbanden

Deze handleiding is van toepassing op de onderstaande modellen

Tilbanden

Toiletband
Flex-toiletband

Variaties

Met en zonder hoofdsteen, met en zonder buikfixatie
Met en zonder hoofdsteen



Waarschuwing! Lees de volledige instructie door voordat u het product in gebruik neemt. De tilband dient gebruikt te worden door een aantoonbaar bekwaame zorgverlener met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

JOYinCARE

✉ info@joyincare.com

☎ 0341 - 768080

VERSIE

03-2023

Bedoeld gebruik

Deze handleiding heeft betrekking op de tilbanden van JOYinCARE. Een tilband is een niet-vormvaste lichaamsondersteuning en bedoeld om een cliënt met een beperkte mobiliteit kortdurend te tillen en/of te verplaatsen in combinatie met een personentilift. Gebruik van een tilband is uitsluitend bedoeld voor het tillen van slechts één persoon per transfer. Indien de tilband geleverd is met baleinen dienen deze te allen tijde gebruikt te worden tijdens de transfers. Het label van de tilband indiceert, tenzij anders vermeld, altijd de buitenzijde van de tilband.

De toiletbanden zijn bedoeld voor het toiletbezoek van cliënten met mobiliteitsklasse C of D en bieden de mogelijkheid om met een passieve tilift een rechtstreekse transfer van (rol)stoel naar toilet te maken. De tilbanden laten het zitvlak volledig vrij voor het weghalen en aanbrengen van kleding en/of incontinentiemateriaal. Toiletbanden zijn alleen geschikt voor cliënten met voldoende rompbalans, schouderfunctie en cognitie. Bij onvoldoende hoofdbalans dient een toiletband met hoofdsteun gebruikt te worden. Evalueer de toepassing van een toiletband regelmatig, in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt, bijvoorbeeld afname van het lichaamsgewicht of amputatie. De rompbalans, schouderfunctie en cognitie van de cliënt dient voor elke transfer gecontroleerd te worden.

De Flex-toiletband biedt in combinatie met een passieve tilift met Flexjuk van JOYinCARE meer ondersteuning aan het bovenlichaam en meer ruimte bij de benen waardoor het aanbrengen en weghalen van kleding en/of incontinentiemateriaal gemakkelijker gaat. De beenslips bieden in combinatie met de plaats van de ophangpunten extra steun. Dit maakt een toiletbezoek voor continente cliënten in mobiliteitsklasse D langer mogelijk dan een conventionele toiletband.

Certificering

Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, is een medisch hulpmiddel (klasse I) en wordt gefabriceerd en getest volgens NEN-EN-ISO 10535. De tilband voldoet aan MDR Verordening (EU) 2017/745 en heeft een CE-markering die is aangebracht op het label van de tilband. Aanpassingen en reparaties aan de tilband mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.



Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel, ongeacht de oorzaak, moet in overeenstemming met MDR Verordening (EU) 2017/745 zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de fabrikant. Er is sprake van een ernstig incident wanneer een incident direct of indirect heeft geleid of had kunnen leiden tot:

1. Het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
2. Een de tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
3. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Maximaal draaggewicht

De toiletbanden zijn geschikt voor het tillen van cliënten tot 200 kg. Tilbanden in maat 3XL, geschikt voor obese cliënten, kunnen worden belast tot maximaal 350 kg. Naar maat gemaakte tilbanden kunnen hierop een uitzondering zijn.



Controleer vóór het gebruik van de tilband ook het maximale tilgewicht van de te gebruiken tilift en het juk. Indien de tilift of het juk een lager maximaal tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan dit maximale tilgewicht te houden.

Type tilbanden

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type band dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Deze handleiding heeft betrekking op de volgende modellen:



Toiletband

- Uitvoeringen:** Met hoofdsteen met of zonder buikfixatie, zonder hoofdsteen met buikfixatie
- Materiaal:** Polyester
- Ophanging:** - Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging
- Lussen voor 2- of 4-punts juk met lus ophanging

De Toiletband is voorzien van gepolsterde okselrollen. De uitvoering zonder hoofdsteen is standaard uitgevoerd met buikfixatie en antislip aan de binnenzijde van het rugpand. De beenslips worden van buiten naar binnen aangebracht.



Flex-toiletband

- Uitvoeringen:** Met of zonder hoofdsteen
- Materiaal:** Polyester
- Ophanging:** - Careclips voor 4-punts Flexjuk (JOYinCARE)

De Flex-toiletband is te herkennen aan de oranje Careclips en alleen geschikt voor gebruik in combinatie met het Flexjuk van JOYinCARE. De tilband is voorzien van langere beenslips die van binnen naar buiten worden aangebracht. Zowel de okselrollen als de onderzijde van het rugpand zijn voorzien van polstering. De uitvoering zonder hoofdsteen is uitgevoerd met antislip op het rugpand.



Maten tilbanden


De geschikte maat kan bepaald worden aan de hand van de tilbanden meetkaart. Iedere situatie blijft echter uniek. Neem bij vragen of twijfel en voor obese cliënten boven 200 kg altijd contact op met JOYinCARE. Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt en in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

kg	0 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200	200 - 350		
0 - 100	XXS	XS	XS	XS																	
100 - 110		XS	XS	XS																	
110 - 115		XS	XS	XS																	
115 - 120		XS	XS		S	S															
120 - 125		XS	XS		S	S	S														
125 - 130					S	S	S														
130 - 135					S	S	S														
135 - 140					S	S	S	M	M												
140 - 145					S	S		M	M												
145 - 150								M	M	M	L	L									
150 - 155								M	M	M	L	L			XXL	XXL	XXL	3XL	JIC		
155 - 160								M	M	M	L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL	XXL	3XL	JIC
160 - 165								M	M		L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL		3XL	JIC
165 - 170									L	L	L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
170 - 175									L	L	L	L		XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
175 - 180									L	L	L	L		XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
180 - 185									L	L	L	L		XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
185 - 190											XL	XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
190 - 195											XL	XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
195 - 200											XL	XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC

Tilband bevestiging

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personentillift door middel van Careclips of lussen. Controleer voor gebruik alle clips of lussen op afwijkingen of gebreken. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

A) Door middel van clips

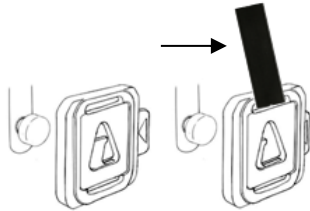

Aanbrengen van de Careclip: Zorg dat de spanning volledig van de clip af is. Druk het schuifje aan de zijkant van de clip volledig in en plaats de opening die nu ontstaat volledig over het paddestoeltje van het tiljuk. Laat het schuifje los. Het schuifje sluit de clip af en de clip is daarmee veilig geborgd op het paddestoeltje van het tiljuk. Bevestig altijd eerst de schouderclips en daarna de beenclips.


Verwijderen van de Careclip: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de clip af is, voordat de clip wordt verwijderd. Druk het schuifje volledig in en til de clip volledig over het paddestoeltje heen. Verwijder eerst de beenclips en daarna de schouderclips.



Controleer altijd voor het tillen of alle clips goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan het **handvat** van de clip (zie pijl) te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de clips nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle clips goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De Careclip is een universele veiligheidsclip welke veilig gebruikt kan worden in combinatie met een tillift met de volgende specificaties. De tillift dient uitgerust te zijn met paddestoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

B) Door middel van lussen

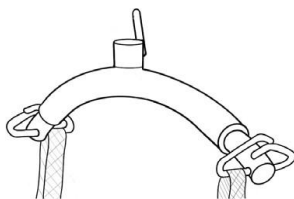

Aanbrengen van de lussen: Zorg dat de spanning volledig van de lus af is. Hang de lus over de haak van het tiljuk. Kruis de beenlussen door deze door elkaar heen te halen. Kruis de schouderlussen niet en gebruik dezelfde lengte voor beide schouderlussen en dezelfde lengte voor beide beenclips. Bevestig eerst de schouderlussen en daarna de beenlussen.

Verwijderen van de lussen: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de lus af is, voordat de lus wordt verwijderd. Til de lussen over de haken van de tilarm. Verwijder eerst de beenlussen en daarna de schouderlussen.



Controleer altijd voor het tillen of alle lussen goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan de lus te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de lussen nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle lussen goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke tillift uitgerust met een tiljuk met lus ophanging. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

Toiletband aanbrengen in zitpositie

Bedoeld voor het tillen met een toiletband, niet voor een Flex-toiletband.

1. Plaats bij een tilband met hoofdsteen de baleinen in de hoofdsteen.
2. Laat de cliënt iets naar voren buigen en breng de toiletband achter de cliënt aan **tot de broekriem** en **plaats de armen over de tilband**.
3. Sluit de hoofdsteenbandjes bij een toiletband met hoofdsteen.
4. Haal de beenslips **van buiten naar binnen** onder de bovenbenen door. Bij een tilband met lussen: de lussen van de beenslips door de eerste lus kruisen.
5. Breng het juk met behulp van de handbediening in de zitpositie en bevestig nu de tilband aan het tiljuk. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.
6. Verwijder de baleinen als de transfer is afgerond.



Flex-toiletband aanbrengen in zitpositie

Bedoeld voor het tillen met een Flex-toiletband. Alleen gebruiken in combinatie met het Flexjuk van JOYinCARE.

1. Plaats bij een tilband met hoofdsteen de baleinen in de hoofdsteen.
2. Breng de Flex-toiletband aan achter de rug van de cliënt **tot de broekriem** en **plaats de armen over de tilband**.
3. Sluit de hoofdsteenbandjes bij een toiletband met hoofdsteen.
4. Breng de beenslips **van binnen naar buiten** onder de benen door.
5. Breng het juk met behulp van de handbediening in de zitpositie.
6. Bevestig de **4 oranje veiligheidsclips** aan de paddenstoeltjes met **oranje indicering** van het Flexjuk. Controleer of alle clips goed vastzitten.
7. Hef de tillift omhoog door middel van de handbediening. Zorg ervoor dat de benen- en schouderophanging gelijktijdig omhoog gaan, dit kan gecorrigeerd worden door het Flexjuk te laten kantelen.



Toiletband aanbrengen in ligpositie

Bedoeld voor het tillen met een toiletband of Flex-toiletband.

1. Plaats bij een tilband met hoofdsteen de baleinen in de hoofdsteen.
2. Draai de cliënt op de zij.
3. Leg de tilband achter de cliënt en breng de tilband aan **tot de broekriem**.
4. Breng de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door.
5. Draai de cliënt terug met de rug op de tilband. Trek de beenslip en schouderclip onder de cliënt uit. Draai de cliënt indien nodig nog een beetje door.
6. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. Beenslips van toiletband van **buiten naar binnen** aanbrengen, beenslips van Flex-toiletband van **binnen naar buiten**. Bij een tilband met lussen; de lussen van de beenslips altijd kruisen, door de eerste lussen van de beenslips door elkaar te halen.
7. Plaats de armen van de cliënt over de toiletband en breng het bed eventueel al iets in zitstand.
8. Sluit de hoofdsteenhandjes van een toiletband met hoofdsteen.
9. Bevestig de tilband aan het tiljuk. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.
10. Verwijder de baleinen als de transfer is afgerond.

Onderhoudsvorschriften

De te verwachten levensduur van de tilbanden is minimaal 2 jaar bij normaal gebruik en onderhoud zoals in de handleiding en op het label voorgeschreven. Aanpassingen of reparaties anders dan door de fabrikant uitgevoerd, zorgen ervoor dat een tilband bij inspectie afgekeurd dient te worden.

Wasvoorschriften tilband:

- Controleer vóór het wassen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label van de tilband.
- Verwijder kunststof baleinen voor het wassen uit de tilband.
- Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.
- Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmiddel. Voor behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.
- Tilbanden niet strijken en niet drogen in de droger.

Inspectie

Controleer de tilband, clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren, wijkende delen, (brand)gaten, losse stiksels, vuil of verkleuringen door bleken en de leesbaarheid van het label.

Inspecties dienen te worden geregistreerd op het logboek van de tilband, zie laatste pagina van deze handleiding. Labels of tags ten behoeve van inspecties of gebruik mogen alleen worden bevestigd aan het handvat van de Careclip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband. Voor een tilband met lussen is dit toegestaan aan het tussenstuk van de middelste lus.



Controleer iedere tilband vóór elk gebruik. Geadviseerd wordt om het logboek van de tilband na elke wasbeurt of minimaal 1 keer per maand in te vullen. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik. Meer informatie over inspectie is te vinden op www.joyincare.com/downloads.

Recycling

Aan het einde van de levensduur dient de tilband op de juiste manier te worden gerecycled. Lever de tilband daarom in bij de betreffende hulpmiddelenleverancier of fabrikant. JOYinCARE zorgt voor de juiste verwerking van het product.

Tilband etiket



Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing



Waarschuwing



CE-marketing
Verordening (EU) 2017/745
Medische hulpmiddelen klasse I



Leverancier / distributeur



Fabrikant



Batchnummer



Serienummer



UDI-codering



Medisch hulpmiddel



Normale was op maximaal 60 graden



Niet bleken met chloorbleekmiddel



Niet drogen in de droger



Niet strijken



Niet droog reinigen



Scan voor meer informatie
over de tilbanden van
JOYinCARE de QR code.

Aanbrengen naamlabel

Een naamlabel mag na levering van de tilband alleen op de volgende manieren worden aangebracht:

- De naam van de client met een watervaste stift op het etiket schrijven aan de buitenzijde van de tilband. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader of in het midden van de baleinzak.
- Een naamlabel met een enkelzijdige warmtebron (zoals een strijkbout) op het etiket aan de buitenzijde van de tilband strijken. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader of in het midden van de baleinzak. Graag een voorbeeld opsturen naar fabrikant Confexion om te controleren of dit veilig is aangebracht waarna overige tilbanden conform dit model kunnen worden voorzien van een gestreken naamlabel.
- Een naamlabel strijken of naaien aan het handvat van de clip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband.



Het schrijven op de tilband, anders dan op het etiket, kan de stof en het garen aantasten en is om die reden niet toegestaan. Bij constatering van een geschreven tekst of marketing op een plek anders dan het etiket, zal de tilband afgekeurd worden.

Garantie

Voor elke geleverde tilband geldt een garantie van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen, gerekend vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van deze garantie zijn normale slijtage van het product, evenals schade die het gevolg is van foutief gebruik. Verbeteringen, opmerkingen en aanbevelingen kunt u sturen naar: feedback@joyincare.com



Leverancier:

JOYinCARE
Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet
Tel 0341- 768080 info@joyincare.com
www.joyincare.com



Fabrikant:

Confexion
Amerikaweg 9, 9407 TJ Assen
www.confexion.com



www.joyincare.com

plezier in de zorg, **zorgen met plezier.**