



## handleiding

### toiletbanden

Deze handleiding is van toepassing op de onderstaande modellen

#### Tilbanden

Toiletband

Flex-toiletband



**Waarschuwing!** Lees de volledige instructie door voordat u het product in gebruik neemt. De tilband dient gebruikt te worden door een aantoonbaar bekwame zorgverlener met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

JOYinCARE

✉ [info@joyincare.com](mailto:info@joyincare.com)

☎ 0341 - 768080

VERSIE

01-2026



**JOYinCARE**  
Hullerweg 118a  
8071 RP Nunspeet  
Nederland

+31 (0)341 76 80 80  
[info@joyincare.com](mailto:info@joyincare.com)  
[www.joyincare.com](http://www.joyincare.com)



**Confexion**  
Amerikaweg 9  
9407 TJ Assen  
Nederland

[www.confexion.com](http://www.confexion.com)

## **1. Bedoeld gebruik**

Deze handleiding heeft betrekking op de tilbanden van JOYinCARE. Een tilband is een niet-vormvaste lichaamsondersteuning en bedoeld om een cliënt met een beperkte mobiliteit kortdurend te tillen en/of te verplaatsen in combinatie met een personentillift. Gebruik van een tilband is uitsluitend bedoeld voor het tillen van slechts één persoon per transfer. Indien de tilband geleverd is met baleinen dienen deze te allen tijde gebruikt te worden tijdens de transfers. Het label van de tilband indiceert, tenzij anders vermeld, altijd de buitenzijde van de tilband.

## **2. Definities**

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende definities gebruikt:

**Toiletband:** bedoeld voor het toiletbezoek van cliënten met mobiliteitsklasse D en biedt de mogelijkheid om met een passieve tillift een rechtstreekse transfer van (rol)stoel naar toilet te maken. De tilband laat het zitvlak volledig vrij voor het weghalen en aanbrengen van kleding en/of incontinentiemateriaal. Een Toiletband is alleen geschikt voor cliënten met voldoende rompbalans, schouderfunctie en cognitie.

**Flex-toiletband:** biedt in combinatie met een passieve tillift met Flexjuk van JOYinCARE meer ondersteuning aan het bovenlichaam en meer ruimte bij de benen waardoor het aanbrengen en weghalen van kleding en/of incontinentiemateriaal gemakkelijker gaat. De beenslips bieden in combinatie met de plaats van de ophangpunten extra steun. Dit maakt een toiletbezoek voor continente cliënten in mobiliteitsklasse D langer mogelijk dan een conventionele toiletband.

## **3. Certificering**

Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, is een medisch hulpmiddel (klasse I) en wordt gefabriceerd en getest volgens NEN-EN-ISO 10535. De tilband voldoet aan MDR Verordening (EU) 2017/745 en heeft een CE-markering die is aangebracht op het label van de tilband. Aanpassingen en reparaties aan de tilband mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.



Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel, ongeacht de oorzaak, moet in overeenstemming met MDR Verordening (EU) 2017/745 zo spoedig mogelijk worden gemeld aan zowel de fabrikant als de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er is sprake van een ernstig incident wanneer een incident direct of indirect heeft geleid of had kunnen leiden tot:

1. Het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
2. Een de tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
3. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

## **4. Maximaal draaggewicht**

De toiletbanden zijn geschikt voor het tillen van cliënten tot 200 kg. Tilbanden in maat 3XL, geschikt voor obese cliënten, kunnen worden belast tot maximaal 350 kg. Naar maat gemaakte tilbanden kunnen hierop een uitzondering zijn.



Controleer vóór het gebruik van de tilband ook het maximale tilgewicht van de te gebruiken tillift en het juk. Indien de tillift of het juk een lager maximaal tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan het maximale tilgewicht te houden.

## 5. Maten tilbanden


De geschikte maat kan bepaald worden aan de hand van de tilbanden meetkaart. Iedere situatie blijft echter uniek. Neem bij vragen of twijfel en voor obese cliënten boven 200 kg altijd contact op met JOYinCARE. Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt en in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

| cm \ kg   | 0 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | 200 - 350 |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 - 100   | XXS    | XS      | XS      | XS      |         |         |         |         |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 100 - 110 |        | XS      | XS      | XS      |         |         |         |         |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 110 - 115 |        | XS      | XS      | XS      |         |         |         |         |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 115 - 120 |        | XS      | XS      |         | S       | S       |         |         |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 120 - 125 |        | XS      | XS      | S       | S       | S       |         |         |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 125 - 130 |        |         |         | S       | S       | S       |         |         |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 130 - 135 |        |         |         | S       | S       | S       |         |         |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 135 - 140 |        |         |         | S       | S       | S       | M       | M       |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 140 - 145 |        |         |         | S       | S       |         | M       | M       |         |         |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 145 - 150 |        |         |         |         |         | M       | M       | M       | L       | L       |         |          |           |           |           |           |           |           |           |
| 150 - 155 |        |         |         |         |         | M       | M       | M       | L       | L       |         |          |           |           | XXL       | XXL       | XXL       | 3XL       | JIC       |
| 155 - 160 |        |         |         |         |         | M       | M       | M       | L       | L       | LL      | LL       | LL        | LL        | XXL       | XXL       | XXL       | 3XL       | JIC       |
| 160 - 165 |        |         |         |         |         | M       | M       |         | L       | L       | LL      | LL       | LL        | LL        | XXL       | XXL       |           | 3XL       | JIC       |
| 165 - 170 |        |         |         |         |         |         | L       | L       | L       | L       | LL      | LL       | LL        | LL        | XXL       | XXL       | 3XL       | 3XL       | JIC       |
| 170 - 175 |        |         |         |         |         |         | L       | L       | L       | L       |         | XL       | XL        | XL        | XXL       | XXL       | 3XL       | 3XL       | JIC       |
| 175 - 180 |        |         |         |         |         |         | L       | L       | L       | L       | XL      | XL       | XL        | XL        | XXL       | XXL       | 3XL       | 3XL       | JIC       |
| 180 - 185 |        |         |         |         |         |         | L       | L       | L       |         | XL      | XL       | XL        | XL        | XXL       | XXL       | 3XL       | 3XL       | JIC       |
| 185 - 190 |        |         |         |         |         |         |         |         | XL      | XL      | XL      | XL       | XL        | XL        | XXL       | XXL       | 3XL       | 3XL       | JIC       |
| 190 - 195 |        |         |         |         |         |         |         |         | XL      | XL      | XL      | XL       | XL        | XL        | XXL       | XXL       | 3XL       | 3XL       | JIC       |
| 195 - 200 |        |         |         |         |         |         |         |         | XL      | XL      | XL      | XL       | XL        | XL        | XXL       | XXL       | 3XL       | 3XL       | JIC       |

## 6. Tilband bevestiging

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personentillift door middel van Careclips of lussen. Controleer voor gebruik alle clips of lussen op afwijkingen of gebreken. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

### 6.1 Door middel van clips

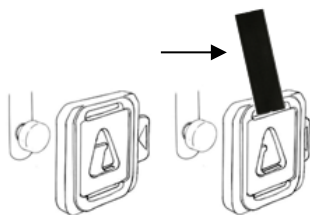

Aanbrengen van de Careclip: Zorg dat de spanning volledig van de clip af is. Druk het schuifje aan de zijkant van de clip volledig in en plaats de opening die nu ontstaat volledig over het paddenstoeltje van het tiljuk. Laat het schuifje los. Het schuifje sluit de clip af en de clip is daarmee veilig geborgd op het paddenstoeltje van het tiljuk. Bevestig altijd eerst de schouderclips en daarna de beenclips.


Verwijderen van de Careclip: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de clip af is, voordat de clip wordt verwijderd. Druk het schuifje volledig in en til de clip volledig over het paddenstoeltje heen. Verwijder eerst de beenclips en daarna de schouderclips.



Controleer altijd voor het tillen of alle clips goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan het **handvat** van de clip (zie pijl) te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de clips nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle clips goed gecontroleerd zijn.

**Conformiteit:** De Careclip is een universele veiligheidsclip welke veilig gebruikt kan worden in combinatie met een tillift met de volgende specificaties. De tillift dient uitgerust te zijn met paddenstoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

## 6.2 Door middel van lussen

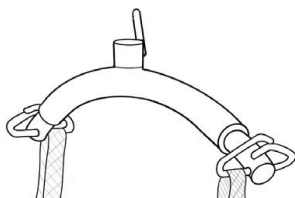

**Aanbrengen van de lussen:** Zorg dat de spanning volledig van de lus af is. Hang de lus over de haak van het tiljuk. Kruis de beenlussen door deze door elkaar heen te halen. Kruis de schouderlussen niet en gebruik dezelfde lengte voor beide schouderlussen en dezelfde lengte voor beide beenlussen. Bevestig eerst de schouderlussen en daarna de beenlussen.

**Verwijderen van de lussen:** Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de lus af is, voordat de lus wordt verwijderd. Til de lussen over de haken van de tilarm. Verwijder eerst de beenlussen en daarna de schouderlussen.



Controleer altijd voor het tillen of alle lussen goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan de lus te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de lussen nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle lussen goed gecontroleerd zijn.

**Conformiteit:** De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke tillift uitgerust met een tiljuk met lus ophanging. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

## 7. Toiletband

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type tilband dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Voor de definitie van de Toiletband, zie hoofdstuk 2.

### 7.1 Toiletband modellen

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de volgende modellen van de Toiletband:



#### Toiletband

- |               |                                                                                                      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uitvoeringen: | - met hoofdsteen met of zonder buikfixatie<br>- zonder hoofdsteen met buikfixatie                    |
| Materiaal:    | Polyester                                                                                            |
| Ophanging:    | - Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging<br>- Lussen voor 2- of 4-punts juk met lus ophanging |

De Toiletband is voorzien van gepolsterde okselrollen. De uitvoering zonder hoofdsteen is standaard uitgevoerd met buikfixatie en antislip aan de binnenzijde van het rugpand. De beenlussen worden van buiten naar binnen aangebracht.



## 7.2 Aanbrengen in zitpositie

1. Plaats bij een Toiletband met hoofdsteen de baleinen in de hoofdsteen.
2. Laat de cliënt iets naar voren buigen en breng de toiletband achter de cliënt aan **tot de broekriem** en **plaats de armen over de tilband**.
3. Sluit de hoofdsteenbandjes bij een toiletband met hoofdsteen.
4. Haal de beenslips **van buiten naar binnen** onder de bovenbenen door. Bij een tilband met lussen: de lussen van de beenslips door de eerste lus kruisen.
5. Breng het juk met behulp van de handbediening in de zitpositie en bevestig nu de tilband aan het tiljuk. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.
6. Verwijder de baleinen als de transfer is afgerond.



## 7.3 Aanbrengen in ligpositie

1. Plaats bij een Toiletband met hoofdsteen de baleinen in de hoofdsteen.
2. Draai de cliënt op de zij.
3. Leg de tilband achter de cliënt en breng de tilband aan **tot de broekriem**.
4. Breng de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door.
5. Draai de cliënt terug met de rug op de tilband. Trek de beenslip en schouderclip onder de cliënt uit. Draai de cliënt indien nodig nog een beetje door.
6. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. Breng de beenslips van de Toiletband van **buiten naar binnen** aan. Bij een tilband met lussen; de lussen van de beenslips altijd kruisen, door de eerste lussen van de beenslips door elkaar te halen.
7. Plaats de armen van de cliënt over de toiletband en breng het bed eventueel al iets in zitstand.
8. Sluit de hoofdsteenbandjes van een Toiletband met hoofdsteen.
9. Bevestig de tilband aan het tiljuk. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.
10. Verwijder de baleinen als de transfer is afgerond.

## 8. Flex-toiletband

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type tilband dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Voor de definitie van de Flex-toiletband, zie hoofdstuk 2.

### 8.1 Flex-toiletband modellen

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de volgende modellen van de Flex-toiletband:



#### Flex-toiletband

|               |                                              |
|---------------|----------------------------------------------|
| Uitvoeringen: | Met of zonder hoofdsteen                     |
| Materiaal:    | Polyester                                    |
| Ophanging:    | - Careclips voor 4-punts Flexjuk (JOYinCARE) |

De Flex-toiletband is te herkennen aan de oranje Careclips en alleen geschikt voor gebruik in combinatie met het Flexjuk van JOYinCARE. De tilband is voorzien van langere beenslips die van binnen naar buiten worden aangebracht. Zowel de okselrollen als de onderzijde van het rugpand zijn voorzien van polstering. De uitvoering zonder hoofdsteen is uitgevoerd met antislip op het rugpand.



## 8.2 Flex-toiletband aanbrengen in zitpositie

1. Plaats bij een Flex-toiletband met hoofdsteen de baleinen in de hoofdsteen.
2. Breng de tilband aan achter de rug van de cliënt **tot de broekriem** en **plaats de armen over de tilband**.
3. Sluit de hoofdsteenbandjes bij een toiletband met hoofdsteen.
4. Breng de beenslips **van binnen naar buiten** onder de benen door.
5. Breng het juk met behulp van de handbediening in de zitpositie.
6. Bevestig de **4 oranje veiligheidsclips** aan de paddenstoeltjes met **oranje indicering** van het Flexjuk. Controleer of alle clips goed vastzitten.
7. Hef de tillift omhoog door middel van de handbediening. Zorg ervoor dat de benen- en schouderophanging gelijktijdig omhoog gaan, dit kan gecorrigeerd worden door het Flexjuk te laten kantelen.



## 8.3 Aanbrengen Flex-toiletband in ligpositie

1. Plaats bij een Flex-toiletband met hoofdsteen de baleinen in de hoofdsteen.
2. Draai de cliënt op de zij.
3. Leg de tilband achter de cliënt en breng de tilband aan **tot de broekriem**.
4. Breng de beenslip en de schouderclip onder de cliënt door.
5. Draai de cliënt terug met de rug op de tilband. Trek de beenslip en schouderclip onder de cliënt uit. Draai de cliënt indien nodig nog een beetje door.
6. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. Breng de beenslips van de tilband van **binnen naar buiten** aan. Bij een tilband met lussen; de lussen van de beenslips altijd kruisen, door de eerste lussen van de beenslips door elkaar te halen.
7. Plaats de armen van de cliënt over de tilband en breng het bed eventueel al iets in zitstand.
8. Sluit de hoofdsteenbandjes van een Flex-toiletband met hoofdsteen.
9. Bevestig de tilband aan het tiljuk. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.
10. Verwijder de baleinen als de transfer is afgerond.

## 9. Onderhoudsvoorschriften

De te verwachten levensduur van de tilbanden is minimaal 2 jaar bij normaal gebruik en onderhoud zoals in de handleiding en op het label voorgeschreven. Aanpassingen of reparaties anders dan door de fabrikant uitgevoerd, zorgen ervoor dat een tilband bij inspectie afgekeurd dient te worden.

Wasvoorschriften tilband:

- Controleer vóór het wassen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label van de tilband.
- Verwijder kunststof baleinen voor het wassen uit de tilband.
- Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.
- Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmiddel. Voor behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.
- Tilbanden niet strijken en niet drogen in de droger.

## 10. Inspectie

Controleer de tilband, clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren, wijkende delen, (brand)gaten, losse stiksels, vuil of verkleuringen door bleken en de leesbaarheid van het label.

Naast de inspecties voor elk gebruik, dient de tilband ten minste 1 keer per jaar gekeurd te worden. Deze keuring is verplicht en dient te worden uitgevoerd door aantoonbaar gekwalificeerd personeel. Zowel de keuring als de inspecties dienen te worden geregistreerd op het logboek van de tilband. Deze kan opgevraagd worden bij JOYinCARE of bij de dealer.

Labels of tags ten behoeve van inspecties of gebruik mogen alleen worden bevestigd aan het handvat van de Careclip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband. Voor een tilband met lussen is dit toegestaan aan het tussenstuk van de middelste lus.



Controleer iedere tilband vóór elk gebruik. Geadviseerd wordt om het logboek van de tilband na elke wasbeurt of minimaal 1 keer per maand in te vullen. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

### **11. Recycling**

Aan het einde van de levensduur dient de tilband op de juiste manier te worden gerecycled. Lever de tilband daarom in bij de betreffende hulpmiddelenleverancier of fabrikant. JOYinCARE zorgt voor de juiste verwerking van het product.

### **12. Tilband etiket**



Raadpleeg de  
gebruiksaanwijzing



Waarschuwing



CE-markering  
Verordening (EU) 2017/745  
Medische hulpmiddelen klasse I



Leverancier / distributeur



Fabrikant



Batchnummer



Serienummer



Medisch hulpmiddel



Normale was op maximaal 60 graden



Niet bleken met chloorbleekmiddel



Niet drogen in de droger



Niet strijken



Niet droog reinigen

### **13. Aanbrengen naamlabel**

Een naamlabel mag na levering van de tilband alleen op de volgende manieren worden aangebracht:

- De naam van de client met een watervaste stift op het etiket schrijven aan de buitenzijde van de tilband. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader of in het midden van de baleinenzak.
- Een naamlabel met een enkelzijdige warmtebron (zoals een strijkbout) op het etiket aan de buitenzijde van de tilband strijken. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader of in het midden van de baleinenzak. Graag een voorbeeld opsturen naar fabrikant Confexion om te controleren of dit veilig is aangebracht waarna overige tilbanden conform dit model kunnen worden voorzien van een gestreken naamlabel.
- Een naamlabel strijken of naaien aan het handvat van de clip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband.



Het schrijven op de tilband, anders dan op het etiket of de baleinenzak, kan de stof en het garen aantasten en is om die reden niet toegestaan. Bij constatering van een geschreven tekst of markering op een plek anders dan het etiket, zal de tilband afgekeurd worden.

#### **14. Garantie**

Voor elke geleverde tilband geldt een garantie van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen, gerekend vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van deze garantie zijn normale slijtage van het product, evenals schade die het gevolg is van foutief gebruik. Voor verbeteringen, opmerkingen en aanbevelingen kunt u contact opnemen met de leverancier.



[www.joyincare.com](http://www.joyincare.com)

plezier in de zorg, **zorgen met plezier.**