

passieve tilbanden



handleiding passieve tilbanden

Deze handleiding is van toepassing op de onderstaande modellen

Standaard tilbanden

Standaard tilband
Standaard tilband zonder baleinen
Comfort tilband

Verblijfstilband

VIP verblijfsband (met extra fixatie)
Verblijfsband zonder baleinen
Verblijfsband superfine

Seamless verblijfsband
Longseat verblijfsband
Dolfijn verblijfsband
Comfort verblijfsband



Waarschuwing! Lees de volledige instructie door voordat u het product in gebruik neemt. De tilband dient gebruikt te worden door een aantoonbaar bekwame zorgverlener met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

JOYinCARE

✉ info@joyincare.com

☎ 0341 - 768080

VERSIE

01-2026





JOYinCARE
Hullerweg 118a
8071 RP Nunspeet
Nederland

+31 (0)341 76 80 80
info@joyincare.com
www.joyincare.com



Confexion
Amerikaweg 9
9407 TJ Assen
Nederland

www.confexion.com

1. Bedoeld gebruik

Deze handleiding heeft betrekking op de tilbanden van JOYinCARE. Een tilband is een niet-vormvaste lichaamsondersteuning en bedoeld om een cliënt met een beperkte mobiliteit kortdurend te tillen en/of te verplaatsen in combinatie met een personentilift. Gebruik van een tilband is uitsluitend bedoeld voor het tillen van slechts één persoon per transfer. Indien de tilband geleverd is met baleinen dienen deze gebruikt te worden tijdens de transfer. Het label van de tilband indiceert, tenzij anders vermeld, altijd de buitenzijde van de tilband.

De passieve tilbanden zijn ontworpen om de cliënt in combinatie met een passieve tilift volledig te ondersteunen bij de transfer. De banden zijn geschikt voor cliënten met mobiliteitsklasse D en E.


2. Definities

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende definities gebruikt:


Standaard tilband: een tilband die van kruin tot stuit aangebracht wordt en het zitvlak van de cliënt vrijlaat. Daardoor zijn deze tilbanden gemakkelijk in de stoel aan te brengen en weg te halen.

Verblijfsband: een tilband die het gehele lichaam ondersteunt en onder het zitvlak doorloopt. Omdat deze tilband tot onder de stuit aangebracht dient te worden, kan de tilband alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden.

Aanbrengen Standaard tilband

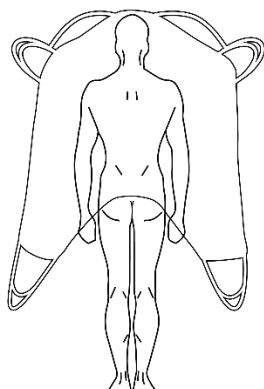

Aanbrengen Verblijfsband

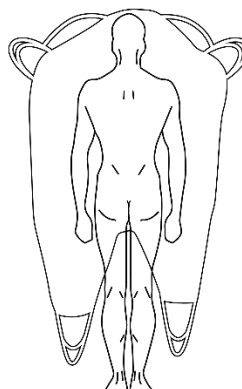

3. Certificering

Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, is een medisch hulpmiddel (klasse I) en wordt gefabriceerd en getest volgens NEN-EN-ISO 10535. De tilband voldoet aan MDR Verordening (EU) 2017/745 en heeft een CE-markering die is aangebracht op het label van de tilband. Aanpassingen en reparaties aan de tilband mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.



Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel, ongeacht de oorzaak, moet in overeenstemming met MDR Verordening (EU) 2017/745 zo spoedig mogelijk worden gemeld aan zowel de fabrikant als de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er is sprake van een ernstig incident wanneer een incident direct of indirect heeft geleid of had kunnen leiden tot:

1. Het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
2. Een de tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
3. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

4. Maximaal draaggewicht

De passieve tilbanden zijn geschikt voor het tillen van cliënten tot 200 kg. Tilbanden in maat 3XL, geschikt voor obese cliënten, kunnen worden belast tot maximaal 350 kg. Naar maat gemaakte tilbanden kunnen hierop een uitzondering zijn.



Controleer vóór het gebruik van de tilband ook het maximale tilgewicht van de te gebruiken tillift en het juk. Indien de tillift of het juk een lager maximaal tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan het maximale tilgewicht te houden.

5. Maten tilbanden


De geschikte maat kan bepaald worden aan de hand van de tilbanden meetkaart. Iedere situatie blijft echter uniek. Neem bij vragen of twijfel en voor obese cliënten boven 200 kg altijd contact op met JOYinCARE. Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt en in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

kg	0 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200	200 - 350
cm	XXS	XS	XS	XS															
0 - 100	XXS	XS	XS	XS															
100 - 110		XS	XS	XS															
110 - 115		XS	XS	XS															
115 - 120		XS	XS		S	S													
120 - 125		XS	XS		S	S	S												
125 - 130					S	S	S												
130 - 135					S	S	S												
135 - 140					S	S	S	M	M										
140 - 145					S	S		M	M										
145 - 150						M	M	M	L	L									
150 - 155						M	M	M	L	L					XXL	XXL	XXL	3XL	JIC
155 - 160						M	M	M	L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL	XXL	3XL	JIC
160 - 165						M	M		L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL		3XL	JIC
165 - 170							L	L	L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
170 - 175							L	L	L	L		XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
175 - 180							L	L	L	L		XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
180 - 185							L	L	L			XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
185 - 190										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
190 - 195										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
195 - 200										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC

6. Tilband bevestiging

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personentillift door middel van Careclips of lussen. Controleer voor gebruik alle clips of lussen op afwijkingen of gebreken. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

6.1 Door middel van clips

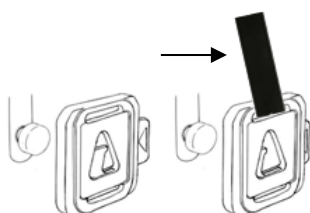

Aanbrengen van de Careclip: Zorg dat de spanning volledig van de clip af is. Druk het schuifje aan de zijkant van de clip volledig in en plaats de opening die nu ontstaat volledig over het paddenstoeltje van het tiljuk. Laat het schuifje los. Het schuifje sluit de clip af en de clip is daarmee veilig geborgd op het paddenstoeltje van het tiljuk. Bevestig altijd eerst de schouderclips en daarna de beenclips.


Verwijderen van de Careclip: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de clip af is, voordat de clip wordt verwijderd. Druk het schuifje volledig in en til de clip volledig over het paddenstoeltje heen. Verwijder eerst de beenclips en daarna de schouderclips.



Controleer altijd voor het tillen of alle clips goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan het **handvat** van de clip (zie pijl) te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de clips nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle clips goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De Careclip is een universele veiligheidsclip welke veilig gebruikt kan worden in combinatie met een tillift met de volgende specificaties. De tillift dient uitgerust te zijn met paddenstoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

6.2 Door middel van lussen

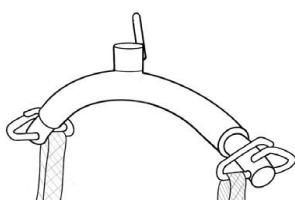

Aanbrengen van de lussen: Zorg dat de spanning volledig van de lus af is. Hang de lus over de haak van het tiljuk. Kruis de beenlussen door deze door elkaar heen te halen (niet kruisen bij een Longseat verblijfsband). Kruis de schouderlussen niet en gebruik dezelfde lengte voor beide schouderlussen en dezelfde lengte voor beide beenlussen. Bevestig eerst de schouderlussen en daarna de beenlussen.

Verwijderen van de lussen: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de lus af is, voordat de lus wordt verwijderd. Til de lussen over de haken van de tilarm. Verwijder eerst de beenlussen en daarna de schouderlussen.



Controleer altijd voor het tillen of alle lussen goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan de lus te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de lussen nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle lussen goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke tillift uitgerust met een tiljuk met lus ophanging. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.



Bij een tilband voorzien van clips én lussen is extra attentie vereist bij het bevestigingen van de tilband. Breng de clips alleen aan op een tiljuk met paddenstoeltjes en de lussen alleen op een tiljuk met haken. Onjuist toepassen van de bevestigingsmethode kan het losraken van de tilband tot gevolg hebben en tot ernstige verwondingen leiden.

7. Standaard tilband

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type tilband dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Voor de definitie van de Standaard tilband, zie hoofdstuk 2.

7.1 Standaard tilband modellen

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de volgende modellen van de Standaard tilband:



Standaard tilband

- Materiaal uitvoeringen: Polyester, Polyester net blauw, Superfine net, Coolplus
- Ophanging:
- Careclips voor 4-puntsjuk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- of 4-puntsjuk met lus ophanging

Een Standaard tilband is bedoeld voor bad-, douche- en/of kortdurend gebruik en is voorzien van actieve hoofdsteen voorzien van baleinen. De Standaard tilband (polyester) is geschikt voor algemeen en kortdurend gebruik. De Standaard tilband (polyester net) is uitgevoerd in netstof en door het sneldrogende materiaal geschikt voor gebruik onder de douche of in bad. De Standaard tilband (superfine net) is uitgevoerd in extra dunne netstof met korte beenpolstering, geschikt voor gebruik in combinatie met nauwsluitende ortheses. De Standaard tilband (coolplus) heeft door het ventilerende materiaal een verkoelende werking op het lichaam en is alleen leverbaar met Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging.



Standaard tilband zonder baleinen

- Materiaal uitvoeringen: Polyester net blauw
- Ophanging:
- Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- of 4-puntsjuk met lus ophanging

De Standaard tilband zonder baleinen heeft een doorlopende hoofdsteen (model van een Longseat verblijfsband) en het model van een Standaard tilband aan de onderzijde. De hoofdsteen is niet voorzien van baleinen en daarmee ook inzetbaar bij cliënten waar het gebruik van baleinen lastig of oncomfortabel is. De tilband kan in een zittende of liggende houding aangebracht en weggehaald worden. De tilband is niet geschikt voor cliënten met onvoldoende hoofdbalans.



Comfort tilband

- Materiaal uitvoeringen: Polyester net blauw
- Ophanging:
- Lussen voor 2-puntsjuk met lus ophanging


Deze tilband met het model van een Standaard tilband aan de onderzijde is bedoeld voor bad-, douche- en/of kortdurend gebruik en is voorzien van actieve hoofdsteen voorzien van verstelbare hoofdsteenbandjes. De tilband is geschikt voor algemeen gebruik en uitgevoerd in sneldrogende netstof.



7.2 Aanbrengen in zitpositie


A) Bedoeld voor het tillen met de Standaard tilband en Standaard tilband zonder baleinen.

1. Plaats de baleinen in de hoofdsteen.
2. Laat de cliënt iets naar voren buigen en breng de tilband achter de cliënt aan tot op de (rol)stoelzitting.
3. Haal de beenslips langs de benen naar voren.
4. Trek de tilband tot aan de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie duwen.
5. Haal de beenslips van buiten naar binnen onder de bovenbenen door.
6. Bij een tilband met lussen: de lussen van de beenslips door de eerste lus kruisen.
7. Bevestig de tilband aan het tiljuk.
8. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.
9. Verwijder de baleinen als de transfer is afgerond.

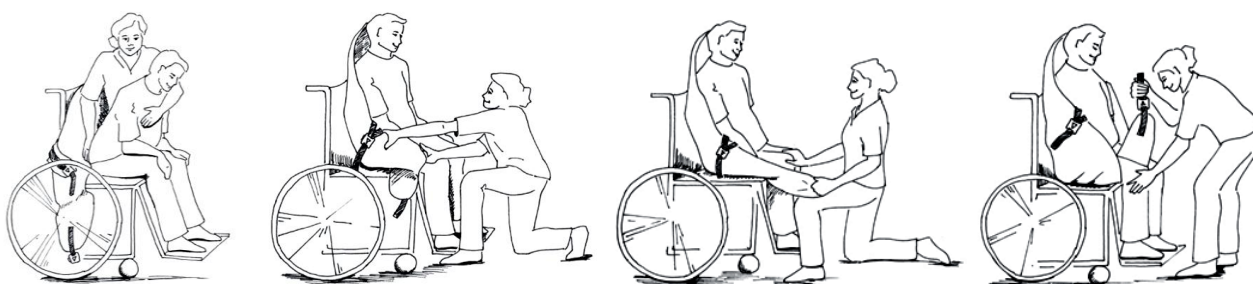

B) Bedoeld voor het tillen met de Comfort tilband.

1. Laat de cliënt iets naar voren buigen en breng de tilband achter de cliënt aan tot op de (rol)stoelzitting. Het rode stiksel geeft hierbij het midden van de tilband aan.
2. Haal de beenslips langs de benen naar voren.
3. Trek de tilband tot aan de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie duwen.
4. Haal de beenslips van buiten naar binnen onder de bovenbenen door. Kruis de lussen van de beenslips door de eerste lus.
5. Bevestig de tilband aan het tiljuk, verstel beide hoofdsteenbandjes naar wens.
6. Controleer of alle lussen goed vastzitten.

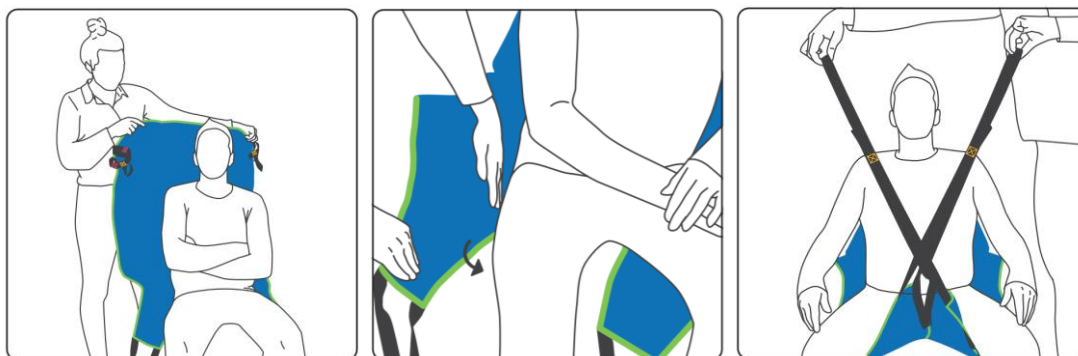


De grijze hoofdsteenbandjes zijn geen dragend deel van de tilband en daarom niet bedoeld voor de bevestiging van de tilband aan het juk. Zorg dat de hoofdsteenbandjes altijd op zo'n manier worden ingesteld dat het hoofd voldoende ondersteuning krijgt.

7.3. Tilband aanbrengen in ligpositie


A) Bedoeld voor het tillen met de Standaard tilband en Standaard tilband zonder baleinen.

1. Plaats de baleinen in de hoofdsteen.
2. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
3. Breng aan van kruin tot stuit. Breng daarna de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam.
4. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt uit. Draai de cliënt indien nodig nog een beetje door.
5. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. Bij een tilband met lussen; de lussen van de beenslips altijd kruisen, door de eerste lussen van de beenslips door elkaar te halen.
6. Bevestig de tilband aan het tiljuk.
7. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.
8. Verwijder de baleinen als de transfer is afgerond.

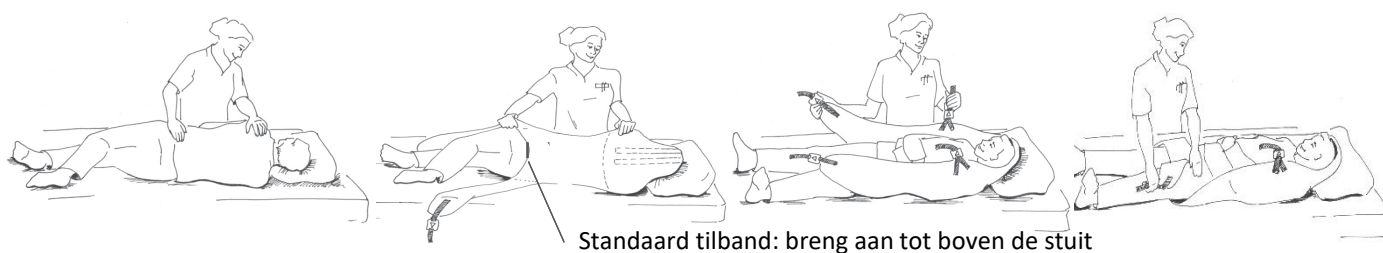

B) Bedoeld voor het tillen met de Comfort tilband.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Breng aan van kruin tot stuit.
3. Breng daarna de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam. Het rode stiksels geeft hierbij het midden van de tilband aan.
4. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt uit. Draai de cliënt indien nodig nog een beetje door.
5. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. De lussen van de beenslips altijd kruisen, door de eerste lussen van de beenslips door elkaar te halen.
6. Bevestig de tilband aan het tiljuk, verstel beide hoofdsteenbandjes naar wens.
7. Controleer of alle lussen goed vastzitten.
8. Zorg ervoor dat het hoofd van de cliënt tijdens de beweging omhoog volledig wordt ondersteund door de hoofdsteen en de bovenste rand van de hoofdsteen zich bij de kruin van het hoofd bevindt.

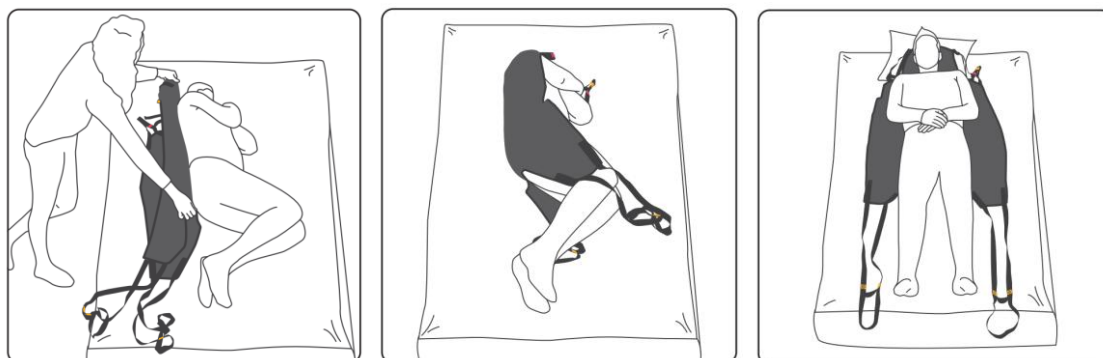

De grijze hoofdsteenbandjes zijn geen dragend deel van de tilband en daarom niet bedoeld voor de bevestiging van de tilband aan het juk. Zorg dat de hoofdsteenbandjes altijd op zo'n manier worden ingesteld dat het hoofd voldoende ondersteuning krijgt.

8. Verblijfsband

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type tilband dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Voor de definitie van een Verblijfsband, zie hoofdstuk 2.

8.1 Verblijfsband modellen

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de volgende modellen van de Verblijfsband:



VIP verblijfsband (met extra fixatie)

- Materiaal uitvoeringen: Recycled polyester, Bamboe zwart, Bamboe jeans, Polyester net zwart, Coolplus, Afstandsbreisel
- Ophanging:
- Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- of 4-puntsjuk met lus ophanging

De VIP verblijfsband (bamboe zwart/jeans of recycled polyester) is geschikt voor algemeen gebruik. De VIP verblijfsband polyester-net is uitgevoerd in zwarte netstof voor gebruik onder de douche of in bad. De VIP verblijfsband Coolplus heeft door het ventilerende materiaal een verkoelende werking op het lichaam. Deze tilbanden zijn veilig inzetbaar bij cliënten met een beenamputatie. De tilbanden kunnen alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden.

De VIP verblijfsband met extra fixatie is voorzien van fixatie mogelijkheden. Deze zorgen ervoor dat de cliënt niet naar voren kan komen ten opzichte van de tilband en zijn/haar benen minder kan spreiden, optrekken en/of strekken. Het materiaal afstandsbreisel heeft een druk verdelende en ventilerende werking.



Verblijfsband zonder baleinen

- Materiaal uitvoeringen: Bamboe jeans
- Ophanging:
- Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- of 4-puntsjuk met lus ophanging

Deze Verblijfsband heeft een rechte bovenkant (model van een Longseat) en het model van een Verblijfsband aan de onderzijde. De doorlopende hoofdsteun is niet voorzien van baleinen. De tilband is daardoor niet geschikt voor cliënten met onvoldoende hoofdbalans. De tilband kan alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden.



Verblijfsband superfine

- Materiaal uitvoeringen: Superfine net
- Ophanging:
- Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- of 4-puntsjuk met lus ophanging

Deze Verblijfsband is voorzien van een amputatie-inzet waardoor een gesloten ruimte tussen de beenslips ontstaat. Hierdoor is de tilband veilig inzetbaar bij cliënten met een beenamputatie. De tilband is uitgevoerd in extra dunne netstof met korte beenpolstering, zeer geschikt voor gebruik in combinatie met nauwsluitende orthoses. De tilband kan alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden.





Seamless verblijfsband

- Materiaal uitvoeringen: Bamboe zwart
- Ophanging:
- Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- of 4-puntsjuk met lus ophanging

Deze Verblijfsband heeft een verlengd rugpand dat volledig onder het zitvlak doorloopt en heeft daardoor in verhouding kortere en bredere beenslips. De tilband heeft geen naden bij het zitvlak, het rugpand en de schouders en is hierdoor geschikt voor cliënten met een gevoelige huid en hinder ervaren van naden. De tilband kan alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden.



Longseat verblijfsband

- Materiaal uitvoeringen: Bamboe jeans, Bamboe zwart, Polyester net zwart
- Ophanging:
- Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging (altijd in combinatie met verbredingsstang)
 - Lussen voor 2- of 4-puntsjuk met lus ophanging

Deze Verblijfsband heeft een rechthoekig model, zonder beenslips en baleinen. De tilband loopt onder het zitvlak door en kan alleen in een liggende houding aangebracht of weggehaald worden. De tilband is comfortabel voor mensen met een beenamputatie, zeer gevoelige bovenbenen of contracturen. Bij gebruik aan een 4-puntsjuk met clip ophanging moet een verbredingsstang gebruikt worden. De tilband is niet geschikt voor cliënten met onvoldoende hoofdbalans.



Dolfijn verblijfsband

- Materiaal uitvoeringen: Bamboe zwart
- Ophanging:
- Careclips voor 4-punts juk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- of 4-puntsjuk met lus ophanging

Deze Verblijfsband bestaat uit een ovaal en doorlopend model met geïntegreerde beenslips en heeft geen naden bij het zitvlak, het rugpand en schouders. De geïntegreerde beenslips zijn voorzien van brede polstering en de ophangpunten bevinden zich in het midden van de band. Hierdoor is de tilband geschikt voor gebruik bij cliënten waarbij normale beenslips te veel druk aan de binnen- en onderkant van de benen veroorzaken.





Comfort verblijfsband

Materiaal uitvoeringen: Recycled polyester, Polyester net zwart
Ophanging: - Lussen voor 2-puntsjuk met lus ophanging

Deze Verblijfsband is bedoeld voor algemeen gebruik en geschikt om gedurende de dag op te blijven zitten. De tilband is voorzien van een actieve hoofdsteen voorzien van verstelbare hoofdsteenbandjes. De tilbanden kunnen alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden. De Comfort verblijfsband (recycled polyester) is uitgevoerd in een dunne comfortabele stof in de kleur antraciet. De Comfort verblijfsband (recycled polyester net zwart) is uitgevoerd in zwarte sneldrogende netstof voor gebruik onder de douche of in bad.



8.2. Tilband aanbrengen in ligpositie

A) Bedoeld voor het tillen met de VIP Verblijfsband, Verblijfsband zonder baleinen, Verblijfsband superfine, Seamless verblijfsband, Longseat verblijfsband en Dolfijn verblijfsband.

1. Plaats, indien van toepassing, de baleinen in de hoofdsteen.
2. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
3. Breng aan tot over de stuit. Breng daarna de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam. Bij een Longseat verblijfsband; Breng aan van achterhoofd tot knieholte.
4. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt uit. Draai de cliënt indien nodig nog een beetje door.
5. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. Bij een tilband met lussen; de lussen van de beenslips altijd kruisen, door de eerste lussen van de beenslips door elkaar te halen. De lussen van een Longseat verblijfsband niet kruisen.
6. Bevestig de tilband aan het tiljuk.
7. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.
8. Verwijder de baleinen als de transfer is afgerond.




B) Bedoeld voor het tillen met de VIP Verblijfsband met extra fixatie.

Het gebruik van de extra fixatiemogelijkheden is niet verplicht, maar kan op basis van de behoefte van de cliënt worden toegepast. Indien de fixatie als individuele aanpassing is toegepast op een ander model tilband: breng aan zoals omschreven bij de betreffende tilband, volg onderstaande stappen voor de fixatiemogelijkheden.

1. Breng de tilband in ligpositie aan onder de cliënt, zoals omschreven in hoofdstuk 8.2A.
2. Sluit de buikfixatie en stel strak naar wens.
3. Om ervoor te zorgen dat de benen minder kunnen worden gespreid: Haal de rechter beenslip door het beenbandje dat op de linker beenslip zit.
4. Om ervoor te zorgen dat de benen minder makkelijk kunnen worden opgetrokken: Haal de beenlus van elke beenslip over het bovenbeen van de cliënt heen en breng aan over de lussen/clips van de beenslips.
5. Bevestig de tilband aan het tiljuk en verstel beide hoofdsteunbandjes naar wens.
6. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten en maak de transfer af.

C) Bedoeld voor het tillen met de Comfort verblijfsband.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Breng aan tot over de stuit.
3. Breng daarna de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam. Het rode stiksel geeft hierbij het midden van de tilband aan.
4. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt uit. Draai de cliënt indien nodig nog een beetje door.
5. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. De lussen van de beenslips altijd kruisen, door de eerste lussen van de beenslips door elkaar te halen.
6. Bevestig de tilband aan het tiljuk, verstel beide hoofdsteunbandjes naar wens.
7. Controleer of alle lussen goed vastzitten.
8. Zorg ervoor dat het hoofd van de cliënt tijdens de beweging omhoog volledig wordt ondersteund door de hoofdsteun en de bovenste rand van de hoofdsteun zich bij de kruin van het hoofd bevindt.

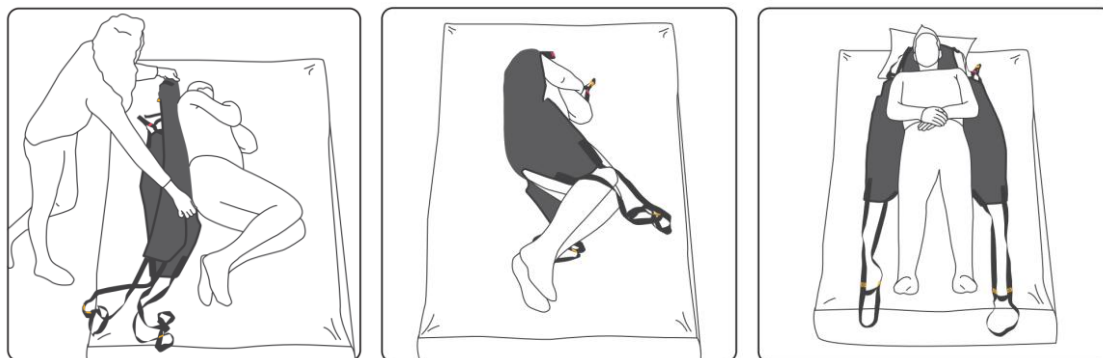


De grijze hoofdsteunbandjes zijn geen dragend deel van de tilband en daarom niet bedoeld voor de bevestiging van de tilband aan het juk. Zorg dat de hoofdsteunbandjes altijd op zo'n manier worden ingesteld dat het hoofd voldoende ondersteuning krijgt.

8.3 Tillen met verbredingsstang

Bedoeld voor het gebruik van een Longseat verblijfsband met clips, in combinatie met de verbredingsstang en 4-puntsjuk.


- 1) Bevestig de clips van de verbredingsstang aan de beenophangpunten van het 4-puntsjuk. Zie instructie gebruik verbredingsstang model 2023 hieronder.
- 2) Breng de Longseat verblijfsband aan, zoals eerder omschreven bij 'Tilband aanbrengen in ligpositie'.
- 3) Bevestig de clips bij de schouders aan het juk en de clips bij de benen aan de ophangpunten van de verbredingsstang.
- 4) Controleer of alle clips van zowel de tilband als verbredingsstang goed vastzitten.

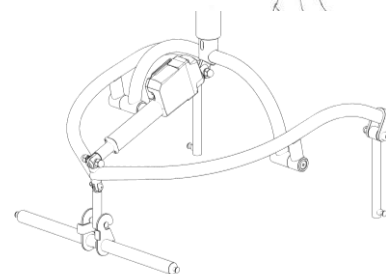

Gebruik verbredingsstang model 2023:

Bevestig de clips van de verbredingsstang aan de beenophangpunten van het 4-puntsjuk door de oranje beugel omlaag te duwen en de clips over de paddenstoelen te plaatsen.

Na gebruik kan de verbredingsstang van het 4-puntsjuk worden verwijderd door de oranje beugel omlaag te duwen en de clips van de paddenstoelen af te halen.

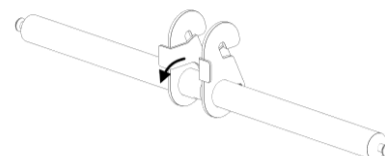

	De verbredingsstang van JOYinCARE is alleen geschikt voor de <u>Longseat verblijfsband</u> met veiligheidsclips van JOYinCARE in combinatie met een tillift met 4-puntsjuk van JOYinCARE.
	Om erosie te voorkomen mag de verbredingsstang niet worden gebruikt in het water / zwembad. Bij roestvorming dient de verbredingsstang buiten gebruik gesteld te worden.
	Verbredingsstang versie 1 – art.nr. 2000000700 De verbredingsstang kan tot maximaal 150 kg worden belast. Voorkom te allen tijde een opwaartse kracht tegen de verbredingsstang om het losraken van het tiljuk te voorkomen. De verbredingsstang mag om die reden niet gebruikt worden in het water.
	Verbredingsstang versie 2, model 2023 – art.nr. 5130000416 De verbredingsstang kan tot maximaal 200 kg worden belast.

9. Onderhoudsvoorschriften

De te verwachten levensduur van de tilbanden is minimaal 2 jaar bij normaal gebruik en onderhoud zoals in de handleiding en op het label voorgeschreven. Aanpassingen of reparaties anders dan door de fabrikant uitgevoerd, zorgen ervoor dat een tilband bij inspectie afgekeurd dient te worden.

Wasvoorschriften tilband:

- Controleer vóór het wassen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label van de tilband.
- Verwijder kunststof baleinen voor het wassen uit de tilband.
- Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.
- Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmiddel. Voor behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.
- Tilbanden niet strijken en niet drogen in de droger.

10. Inspectie

Controleer de tilband, clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren, wijkende delen, (brand)gaten, losse stiksels, vuil of verkleuringen door bleken en de leesbaarheid van het label.

Naast de inspecties voor elk gebruik, dient de tilband ten minste 1 keer per jaar gekeurd te worden. Deze keuring is verplicht en dient te worden uitgevoerd door aantoonbaar gekwalificeerd personeel. Zowel de keuring als de inspecties dienen te worden geregistreerd op het logboek van de tilband. Deze kan opgevraagd worden bij JOYinCARE of bij de dealer.

Labels of tags ten behoeve van inspecties of gebruik mogen alleen worden bevestigd aan het handvat van de Careclip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband. Voor een tilband met lussen is dit toegestaan aan het tussenstuk van de middelste lus.



Controleer iedere tilband vóór elk gebruik. Geadviseerd wordt om het logboek van de tilband na elke wasbeurt of minimaal 1 keer per maand in te vullen. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

11. Recycling

Aan het einde van de levensduur dient de tilband op de juiste manier te worden gerecycled. Lever de tilband daarom in bij de betreffende hulpmiddelenleverancier of fabrikant. JOYinCARE zorgt voor de juiste verwerking van het product.

12. Tilband etiket



Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing



Waarschuwing



CE-markering
Verordening (EU) 2017/745
Medische hulpmiddelen klasse I



Medisch hulpmiddel



Leverancier / distributeur



Fabrikant



Batchnummer



Serienummer



Normale was op maximaal 60 graden



Niet bleken met chloorbleekmiddel



Niet drogen in de droger



Niet strijken



Niet droog reinigen

13. Aanbrengen naamlabel

Een naamlabel mag na levering van de tilband alleen op de volgende manieren worden aangebracht:

- De naam van de client met een watervaste stift op het etiket schrijven aan de buitenzijde van de tilband. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader of in het midden van de baleinenzak.
- Een naamlabel met een enkelzijdige warmtebron (zoals een strijkbout) op het etiket aan de buitenzijde van de tilband strijken. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader of in het midden van de baleinenzak. Graag een voorbeeld opsturen naar fabrikant Confexion om te controleren of dit veilig is aangebracht waarna overige tilbanden conform dit model kunnen worden voorzien van een gestreken naamlabel.
- Een naamlabel strijken of naaien aan het handvat van de clip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband.



Het schrijven op de tilband, anders dan op het etiket of de baleinenzak, kan de stof en het garen aantasten en is om die reden niet toegestaan. Bij constatering van een geschreven tekst of markering op een plek anders dan het etiket, zal de tilband afgekeurd worden.

14. Garantie

Voor elke geleverde tilband geldt een garantie van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen, gerekend vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van deze garantie zijn normale slijtage van het product, evenals schade die het gevolg is van foutief gebruik. Voor verbeteringen, opmerkingen en aanbevelingen kunt u contact opnemen met de leverancier.



www.joyincare.com

plezier in de zorg, **zorgen met plezier.**