

actieve tilbanden



handleiding

actieve tilbanden

Deze handleiding is van toepassing op de onderstaande modellen

Tilbanden

Rugsteunband

Corsetband



Waarschuwing! Lees de volledige instructie door voordat u het product in gebruik neemt. De tilband dient gebruikt te worden door een aantoonbaar bekwame zorgverlener met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

JOYinCARE

✉ info@joyincare.com

☎ 0341 - 768080

VERSIE

07-2022

Bedoeld gebruik

Deze handleiding heeft betrekking op de tilbanden van JOYinCARE. Een tilband is een niet-vormvaste lichaamsondersteuning en bedoeld om een cliënt met een beperkte mobiliteit kortdurend te tillen en/of te verplaatsen in combinatie met een personentilift. Gebruik van een tilband is uitsluitend bedoeld voor het tillen van slechts één persoon per transfer. Het label van de tilband indiceert, tenzij anders vermeld, altijd de buitenzijde van de tilband.

De actieve tilbanden zijn ontworpen om cliënten in combinatie met een actieve (sta-)tillift te ondersteunen bij het gaan staan en zitten. De sta-lift banden zijn geschikt voor cliënten met mobiliteitsklasse C, welke niet in staat zijn om zelfstandig te gaan staan, maar wel enige rompbalans hebben. Ook dienen zij op minimaal één been steun te kunnen nemen, een goede schouderfunctie te hebben en instructies van de zorgverlener op te kunnen opvolgen.

Certificering

Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, is een medisch hulpmiddel (klasse I) en wordt gefabriceerd en getest volgens NEN-EN-ISO 10535. De tilband voldoet aan MDR Verordening (EU) 2017/745 en heeft een CE-markering die is aangebracht op het label van de tilband. Aanpassingen en reparaties aan de tilband mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.



Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel, ongeacht de oorzaak, moet in overeenstemming met MDR Verordening (EU) 2017/745 zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de fabrikant. Er is sprake van een ernstig incident wanneer een incident direct of indirect heeft geleid of had kunnen leiden tot:

1. Het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
2. Een de tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
3. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Maximaal draaggewicht

De actieve tilbanden zijn geschikt voor het tillen van cliënten tot 200 kg. Tilbanden in maat 3XL, geschikt voor obese cliënten, kunnen worden belast tot maximaal 350 kg. Naar maat gemaakte tilbanden kunnen hierop een uitzondering zijn.



Controleer vóór het gebruik van de tilband ook het maximale tilgewicht van de te gebruiken tillift. Indien de tillift een lager maximaal tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan het maximale tilgewicht van de tillift te houden.

Type tilbanden

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type band dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Deze handleiding heeft betrekking op de volgende modellen:



Rugsteunband

- Materiaal: Temperfoam met fleeceloes en antislip gedeelte
- Ophanging: - Dubbele Careclips voor tilarm met clip ophanging
- Lussen voor tilarm met lus ophanging



De rugsteunband wordt aangebracht in de onderrug en is gemaakt van een drukverdelende foam. Het materiaal van de band zorgt tijdens het tillen voor zijwaartse steun. Kleding en incontinentiemateriaal zijn eenvoudig te verwijderen en aan te brengen. De band heeft een universele maatvoering en is voorzien van een buikfixatie met gespsluiting en antislip. De fleeceloes en het antislip gedeelte zijn afneembaar en kunnen gewassen en vervangen worden.



Corsetband

Materiaal: Polyester met antislip gedeelte
Ophanging: - Dubbele Careclips voor tilarm met clip ophanging
 - Lussen voor tilarm met lus ophanging

De corsetband wordt over de schouderbladen en onder de oksels aangebracht. Het hoge rugpand is voorzien van antislip materiaal en zorgt voor een groot steunoppervlak achter de rug. De tilband kan in de stoel aangebracht en weggehaald worden. Kleding en incontinentiemateriaal zijn eenvoudig te verwijderen en aan te brengen. De band is leverbaar in verschillende maten en is voorzien van gepolsterde okselrollen, antislip en een buikfixatie met dubbele gespsluiting.



Maten tilbanden


De geschikte maat kan bepaald worden aan de hand van de tilbanden meetkaart. Iedere situatie blijft echter uniek. Neem bij vragen of twijfel en voor obese cliënten boven 200 kg altijd contact op met JOYinCARE. Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt en in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

| cm \ kg | 0 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | 200 - 350 | |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| 0 - 100 | XXS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - 110 | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 - 115 | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 - 120 | | XS | XS | | S | S | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 - 125 | | XS | XS | | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| 125 - 130 | | | | | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| 130 - 135 | | | | | S | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| 135 - 140 | | | | | S | S | S | M | M | | | | | | | | | | | |
| 140 - 145 | | | | | S | S | | M | M | | | | | | | | | | | |
| 145 - 150 | | | | | | | | M | M | M | L | L | | | | | | | | |
| 150 - 155 | | | | | | | | M | M | M | L | L | | | XXL | XXL | XXL | 3XL | JIC | |
| 155 - 160 | | | | | | | | M | M | M | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 160 - 165 | | | | | | | | M | M | | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 165 - 170 | | | | | | | | | L | L | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 170 - 175 | | | | | | | | | L | L | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 175 - 180 | | | | | | | | | L | L | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 180 - 185 | | | | | | | | | L | L | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 185 - 190 | | | | | | | | | | | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 190 - 195 | | | | | | | | | | | | L | L | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 195 - 200 | | | | | | | | | | | | | L | L | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | JIC |

Tilband bevestiging

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personentillift door middel van Careclips of lussen. Controleer voor gebruik alle clips of lussen op afwijkingen of gebreken. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

A) Door middel van clips

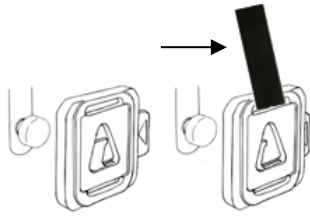

Aanbrengen van de Careclip: Zorg dat de spanning volledig van de clip af is. Druk het schuifje aan de zijkant van de clip volledig in en plaats de opening die nu ontstaat volledig over het paddestoeltje van het tiljuk. Laat het schuifje los. Het schuifje sluit de clip af en de clip is daarmee veilig geborgd op het paddestoeltje van het tiljuk. Gebruik eenzelfde lengte voor de linker en rechter ophanging.


Verwijderen van de Careclip: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de clip af is, voordat de clip wordt verwijderd. Druk het schuifje volledig in en til de clip volledig over het paddestoeltje heen.



Controleer altijd voor het tillen of alle clips goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan het **handvat** van de clip (zie pijl) te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de clips nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle clips goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De Careclip is een universele veiligheidsclip welke veilig gebruikt kan worden in combinatie met een tillift met de volgende specificaties. De tillift dient uitgerust te zijn met paddestoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

B) Door middel van lussen

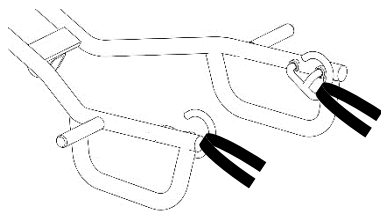

Aanbrengen van de lussen: Zorg dat de spanning volledig van de lus af is. Hang de lussen over de haken van de tilarm. Kruis de banden niet en gebruik dezelfde lengte voor de linker en rechter ophanging.

Verwijderen van de lussen: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de lus af is, voordat de lus wordt verwijderd. Til de lussen over de haken van de tilarm.



Controleer altijd voor het tillen of alle lussen goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan de lus te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de lussen nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle lussen goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke tillift uitgerust met een tiljuk met lus ophanging. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.




Bij een tilband voorzien van clips én lussen is extra attentie vereist bij het bevestigingen van de tilband. Breng de clips alleen aan op een tiljuk met paddestoeltjes en de lussen alleen op een tiljuk met haken. Onjuist toepassen van de bevestigingsmethode kan het losraken van de tilband tot gevolg hebben en tot ernstige verwondingen leiden.

Rugsteunband of Corsetband aanbrengen

Bedoeld voor het tillen met Rugsteunband en Corsetband vanuit zitpositie.

1. Laat de cliënt iets naar voren buigen en breng de rugsteunband achter de cliënt aan tot de broekriem. Breng de Corsetband aan tot over de schouderbladen.
2. Plaats de armen van de cliënt over de tilband. Sluit de buikfixatie.
3. Bevestig de clips of lussen aan het tiljuk.
4. Controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.

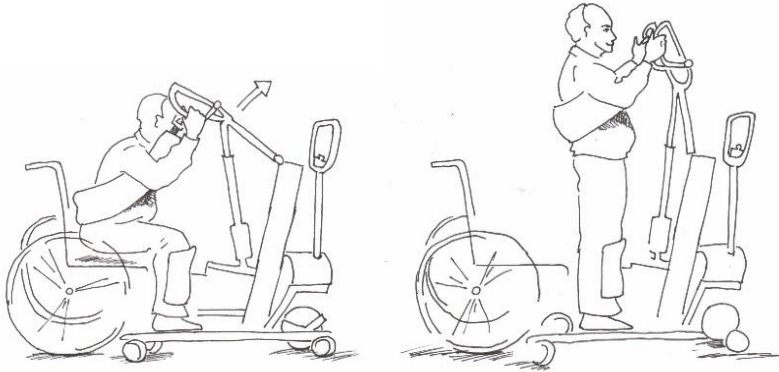

Onderhoudsvoorschriften

De te verwachten levensduur van de tilbanden is minimaal 2 jaar bij normaal gebruik en onderhoud zoals in de handleiding en op het label voorgeschreven. Aanpassingen of reparaties anders dan door de fabrikant uitgevoerd, zorgen ervoor dat een tilband bij inspectie afgekeurd dient te worden.

Wasvoorschriften tilband:

- Controleer vóór het wassen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label van de tilband.
- Verwijder kunststof baleinen voor het wassen uit de tilband.
- Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.
- Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmiddel. Voor behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.
- Tilbanden niet strijken en niet drogen in de droger.

Inspectie

Controleer de tilband, clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren, wijkende delen, (brand)gaten, losse stiksels, vuil of verkleuringen door bleken en de leesbaarheid van het label.

Inspecties dienen te worden geregistreerd op het logboek van de tilband, zie laatste pagina van deze handleiding. Labels of tags ten behoeve van inspecties of gebruik mogen alleen worden bevestigd aan het handvat van de Careclip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband. Voor een tilband met lussen is dit toegestaan aan het tussenstuk van de middelste lus.



Controleer iedere tilband vóór elk gebruik. Geadviseerd wordt om het logboek van de tilband na elke wasbeurt of minimaal 1 keer per maand in te vullen. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik. Meer informatie over inspectie is te vinden op www.joyincare.com/downloads.

Tilband etiket



Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing



Waarschuwing



CE-marketing
Verordening (EU) 2017/745
Medische hulpmiddelen klasse I



Medisch hulpmiddel



Leverancier / distributeur



Fabrikant



Batchnummer



Serienummer



Normale was op maximaal 60 graden



Niet bleken met chloorbleekmiddel



Niet drogen in de droger



Niet strijken



Niet droog reinigen



Scan voor meer informatie
over de tilbanden van
JOYinCARE de QR code.

Aanbrengen naamlabel

Een naamlabel mag na levering van de tilband alleen op de volgende manieren worden aangebracht:

- De naam van de client met een watervaste stift op het etiket schrijven aan de buitenzijde van de tilband. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader.
- Een naamlabel met een enkelzijdige warmtebron (zoals een strijkbout) op het etiket aan de buitenzijde van de tilband strijken. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader. Graag een voorbeeld opsturen naar fabrikant Confexion om te controleren of dit veilig is aangebracht waarna overige tilbanden conform dit model kunnen worden voorzien van een gestreken naamlabel.
- Een naamlabel strijken of naaien aan het handvat van de clip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband.



Het schrijven op de tilband, anders dan op het etiket, kan de stof en het garen aantasten en is om die reden niet toegestaan. Bij constatering van een geschreven tekst of marketing op een plek anders dan het etiket, zal de tilband afgekeurd worden.

Garantie

Voor elke geleverde tilband geldt een garantie van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen, gerekend vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van deze garantie zijn normale slijtage van het product, evenals schade die het gevolg is van foutief gebruik. Verbeteringen, opmerkingen en aanbevelingen kunt u sturen naar: feedback@joyincare.com



Leverancier:

JOYinCARE
Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet
Tel 0341- 768080 info@joyincare.com
www.joyincare.com



Fabrikant:

Confexion
Amerikaweg 9, 9407 TJ Assen
www.confexion.com



www.joyincare.com

plezier in de zorg, **zorgen met plezier.**