



## handleiding

### circulaire tilbanden

Deze handleiding is van toepassing op de onderstaande modellen

#### Standaard tilbanden

Comfort tilband

#### Verblijfstilbanden

Comfort verblijfsband



**Waarschuwing!** Lees de volledige instructie door voordat u het product in gebruik neemt. De tilband dient gebruikt te worden door een aantoonbaar bekwaame zorgverlener met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

JOYincARE

✉ [info@joyincare.com](mailto:info@joyincare.com)

☎ 0341 - 768080

VERSIE

03-2023

### **Bedoeld gebruik**

Deze handleiding heeft betrekking op de tilbanden van JOYinCARE. Een tilband is een niet-vormvaste lichaamsondersteuning en bedoeld om een cliënt met een beperkte mobiliteit kortdurend te tillen en/of te verplaatsen in combinatie met een personentillift. Gebruik van een tilband is uitsluitend bedoeld voor het tillen van slechts één persoon per transfer. Het label van de tilband indiceert, tenzij anders vermeld, altijd de buitenzijde van de tilband.

De Comfort tilbanden zijn ontworpen om de cliënt in combinatie met een passieve tillift volledig te ondersteunen bij de transfer. De banden zijn geschikt voor cliënten met mobiliteitsklasse C, D en E. De actieve hoofdsteun is voorzien van verstelbare hoofdsteunbandjes, waardoor het gebruik van baleinen niet nodig is.

De Comfort standaard tilband laat het zitvlak van de cliënt vrij. Daardoor zijn deze tilbanden gemakkelijk in de stoel aan te brengen en weg te halen.

De Comfort verblijfstilband ondersteunt het gehele lichaam en loopt onder het zitvlak door. Hierdoor kan de verblijfstilband alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden. Voor zowel de cliënt als zorgverlener wordt het maken van een transfer hierdoor minder belastend. De extra coupenaden bij het zitvlak vormen een kuipvorm, welke het onderuitglijden in de tilband voorkomen.

### **Certificering**

Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, is een medisch hulpmiddel (klasse I) en wordt gefabriceerd en getest volgens NEN-EN-ISO 10535. De tilband voldoet aan MDR Verordening (EU) 2017/745 en heeft een CE-markering die is aangebracht op het label van de tilband. Aanpassingen en reparaties aan de tilband mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.



Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel, ongeacht de oorzaak, moet in overeenstemming met MDR Verordening (EU) 2017/745 zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de fabrikant. Er is sprake van een ernstig incident wanneer een incident direct of indirect heeft geleid of had kunnen leiden tot:

1. Het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
2. Een de tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
3. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

### **Maximaal draaggewicht**

De passieve tilbanden zijn geschikt voor het tillen van cliënten tot 200 kg. Naar maat gemaakte tilbanden kunnen hierop een uitzondering zijn.



Controleer vóór het gebruik van de tilband ook het maximale tilgewicht van de te gebruiken tillift en het juk. Indien de tillift of het juk een lager maximaal tilgewicht heeft dan de tilband, dient het laagste maximale tilgewicht te worden aangehouden.

### **Type tilbanden**

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type band dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Deze handleiding heeft betrekking op de volgende modellen:



### Comfort tilband

Materiaal uitvoeringen: Recycled polyester net (blauw)  
 Ophanging: - Lussen voor 2-puntsjuk met lus ophanging

Deze tilband met een standaard model onderzijde is bedoeld voor bad-, douche- en/of kortdurend gebruik en voorzien van actieve hoofdsteen voorzien van verstelbare hoofdsteenbandjes. De Comfort tilband (recycled polyester net blauw) is geschikt voor algemeen gebruik en uitgevoerd in sneldrogende netstof.



### Comfort verblijfsband

Materiaal uitvoeringen: Recycled polyester, recycled polyester net (zwart)  
 Ophanging: - Lussen voor 2-puntsjuk met lus ophanging

De verblijfsband is bedoeld voor algemeen gebruik en geschikt om gedurende de dag op te blijven zitten. De tilband is voorzien van een actieve hoofdsteen voorzien van verstelbare hoofdsteenbandjes. De verblijfsbanden kunnen alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden. De Comfort verblijfsband (recycled polyester) is uitgevoerd in een dunne comfortabele stof in de kleur antraciet. De Comfort verblijfsband (recycled polyester net zwart) is uitgevoerd in zwarte sneldrogende netstof voor gebruik onder de douche of in bad.




### Maten tilbanden

De geschikte maat kan bepaald worden aan de hand van de tilbanden meetkaart. Iedere situatie blijft echter uniek. Neem bij vragen of twijfel en voor obese cliënten boven 200 kg altijd contact op met JOYinCARE. Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt en in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

kg	0 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200	200 - 350	
0 - 100	XXS	XS	XS	XS																
100 - 110		XS	XS	XS																
110 - 115		XS	XS	XS																
115 - 120		XS	XS		S	S														
120 - 125		XS	XS		S	S	S													
125 - 130					S	S	S													
130 - 135					S	S	S													
135 - 140					S	S	S	M	M											
140 - 145					S	S		M	M											
145 - 150							M	M	M	L	L									
150 - 155							M	M	M	L	L				XXL	XXL	XXL	3XL	JIC	
155 - 160							M	M	M	L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL	XXL	3XL	JIC
160 - 165							M	M		L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
165 - 170									L	L	L	L	LL	LL	LL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
170 - 175									L	L	L	L	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
175 - 180									L	L	L	L	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
180 - 185									L	L	L	L	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
185 - 190										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC	
190 - 195										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC	
195 - 200										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC	

### **Tilband bevestiging**

De tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personentillift door middel van lussen. Controleer voor gebruik alle lussen op afwijkingen of gebreken. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

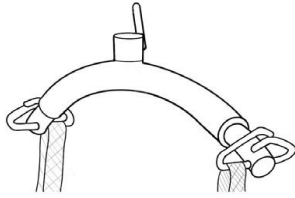

Aanbrengen van de lussen: Zorg ervoor dat het juk op de juiste hoogte staat zodat de lus zonder kracht hieraan bevestigd kan worden. Hang de lus over de haak van het tiljuk. Kruis de beenlussen door deze door elkaar heen te halen. Kruis de schouderlussen niet en gebruik dezelfde lengte voor beide schouderlussen en dezelfde lengte voor beide beenlussen. Bevestig eerst de schouderlussen en daarna de beenlussen. Verstel de hoofdsteunbandjes tot een comfortabele positie.

Verwijderen van de lussen: Zorg ervoor dat het juk op de juiste hoogte staat en het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak, zodat de lus zonder kracht kan worden verwijderd. Til de lussen over de haken van de tilarm. Verwijder eerst de beenlussen en daarna de schouderlussen.






Controleer altijd voor het tillen of alle lussen goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan de lus te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de lussen nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle lussen goed gecontroleerd zijn.

**Conformiteit:** De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke tillift uitgerust met een tiljuk met lus ophanging. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

### **Tilband aanbrengen in zitpositie**

Bedoeld voor het tillen met een standaard tilband.

1. Laat de cliënt iets naar voren buigen en breng de standaard tilband achter de cliënt aan tot op de (rol)stoelzitting. Het rode stiksel geeft hierbij het midden van de tilband aan.
2. Haal de beenslips langs de benen naar voren.
3. Trek de standaard tilband tot aan de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie duwen.
4. Haal de beenslips van buiten naar binnen onder de bovenbenen door. Kruis de lussen van de beenslips door de eerste lus.
5. Bevestig de tilband aan het tiljuk, verstel beide hoofdsteunbandjes naar wens.
6. Controleer of alle lussen goed vastzitten.

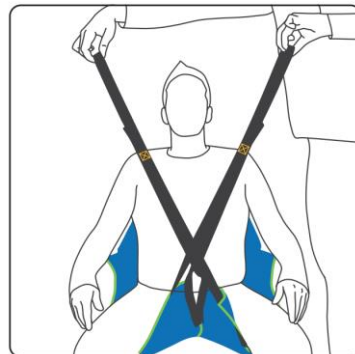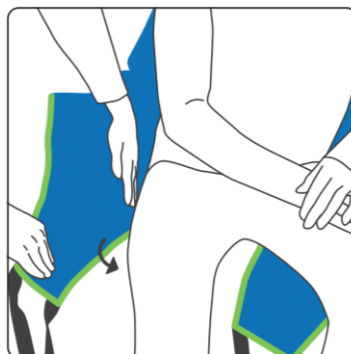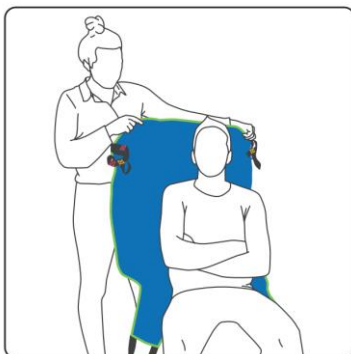


## Tilband aanbrengen in ligpositie


Bedoeld voor het tillen met standaard en verblijfstilbanden.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Bij de standaard tilband; breng aan van kruin tot stuit.  
Bij een verblijfstilband; breng aan tot over de stuit.



Aanbrengen Standaard tilband

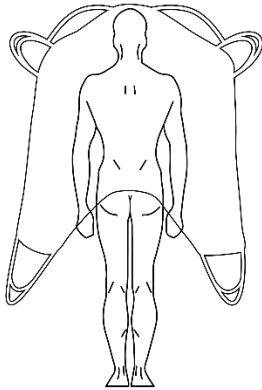

Aanbrengen Verblijfstilband

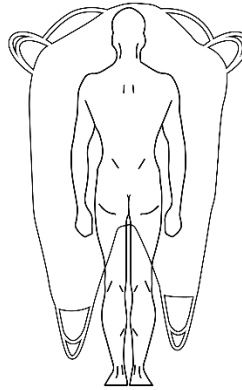

3. Breng daarna de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam. Het rode stiksels geeft hierbij het midden van de tilband aan.
4. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het schouderpunt onder de cliënt uit. Draai de cliënt indien nodig nog een beetje door.
5. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door. De lussen van de beenslips altijd kruisen, door de eerste lussen van de beenslips door elkaar te halen.
6. Bevestig de tilband aan het tiljuk, verstel beide hoofdsteunbandjes naar wens.
7. Controleer of alle lussen goed vastzitten.
8. Zorg ervoor dat het hoofd van de cliënt tijdens de beweging omhoog volledig wordt ondersteund door de hoofdsteun en de bovenste rand van de hoofdsteun zich bij de kruin van het hoofd bevindt.

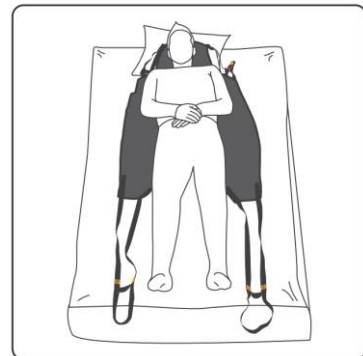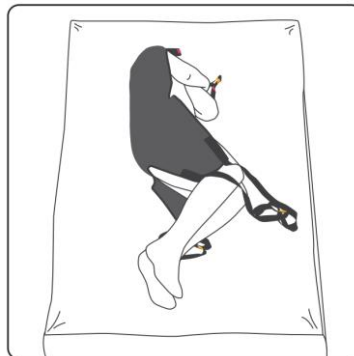

De grijze hoofdsteunbandjes zijn geen dragend deel van de tilband en daarom niet bedoeld voor de bevestiging van de tilband aan het juk. Zorg dat de hoofdsteunbandjes altijd op zo'n manier worden ingesteld dat het hoofd voldoende ondersteuning krijgt.

## Onderhoudsvorschriften

De te verwachten levensduur van de tilbanden is minimaal 2 jaar bij normaal gebruik en onderhoud zoals in de handleiding en op het label voorgeschreven. Aanpassingen of reparaties anders dan door de fabrikant uitgevoerd, zorgen ervoor dat een tilband bij inspectie afgekeurd dient te worden.

Wasvoorschriften tilband:

- Controleer vóór het wassen van elke tilband de wasvoorschriften vermeld op het label van de tilband.
- Vermijd mechanische druk zoals rollen, wringen, trekken of persen tijdens de was-, en droogprocedure. Hierdoor kunnen onderdelen van de tilband beschadigen.
- Tilbanden niet heter wassen dan 60° C. Gebruik geen wasmiddel of schoonmaakmiddel met oplosmiddel of bleekmiddel. Voor behoud van de tilband is het beter om de tilband in een waszak te wassen.
- Tilbanden niet strijken en niet drogen in de droger.

## Inspectie

Controleer de tilband inclusief lussen vóór elk gebruik op scheuren, wijkende delen, (brand)gaten, losse stiksels, vuil of verkleuringen door bleken en de leesbaarheid van het label.

Inspecties dienen te worden geïnspecteerd volgens NEN 7506 en geregistreerd op het logboek van de tilband, zie laatste pagina van deze handleiding. Labels of tags ten behoeve van inspecties of gebruik mogen alleen worden bevestigd aan het tussenstuk van de middelste lus.



Controleer iedere tilband vóór elk gebruik. Geadviseerd wordt om het logboek van de tilband na elke wasbeurt of minimaal 1 keer per maand in te vullen. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik. Meer informatie over inspectie is te vinden op [www.joyincare.com/downloads](http://www.joyincare.com/downloads).

## Recycling

Aan het einde van de levensduur, dient de tilband te worden gerecycled. De Comfort tilbanden zijn gemaakt van een circulaire stof die weer verwerkt kan worden tot stof voor een nieuwe tilband. Tilbanden voor recycling zijn te herkennen aan het groene circulaire logo op het etiket van de tilband. Lever de tilband in bij de betreffende hulpmiddelenleverancier of fabrikant. Ook tilbanden zonder dit circulaire logo mogen worden geretourneerd voor recycling.



## Tilband etiket



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Waarschuwing



CE-marketing  
Verordening (EU) 2017/745  
Medische hulpmiddelen klasse I



Medisch hulpmiddel



Leverancier / distributeur



Fabrikant



Batchnummer



Serienummer



Normale was op maximaal 60 graden



Niet bleken met chloorbleekmiddel



Niet drogen in de droger



Niet strijken



Niet droog reinigen

### **Aanbrengen naamlabel**

Een naamlabel mag na levering van de tilband alleen op de volgende manieren worden aangebracht:

- De naam van de client met een watervast stift op het etiket schrijven aan de buitenzijde van de tilband. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader.
- Een naamlabel met een enkelzijdige warmtebron (zoals een strijkbout) op het etiket aan de buitenzijde van de tilband strijken. Alleen toegestaan in het daarvoor bedoelde kader. Graag een voorbeeld opsturen naar fabrikant Confexion om te controleren of dit veilig is aangebracht waarna overige tilbanden conform dit model kunnen worden voorzien van een gestreken naamlabel.



Het schrijven op de tilband, anders dan op het etiket, kan de stof en het garen aantasten en is om die reden niet toegestaan. Bij constatering van een geschreven tekst of marketing op een plek anders dan het etiket, zal de tilband worden afgekeurd.

### **Garantie**

Voor elke geleverde tilband geldt een garantie van 2 jaar en/of 200 wasbeurten op basis van de garantiebepalingen, gerekend vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van deze garantie zijn normale slijtage van het product, evenals schade die het gevolg is van foutief gebruik. Verbeteringen, opmerkingen en aanbevelingen kunt u sturen naar: [feedback@joyincare.com](mailto:feedback@joyincare.com)



#### **Leverancier:**

JOYinCARE  
Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet  
Tel 0341- 768080 [info@joyincare.com](mailto:info@joyincare.com)  
[www.joyincare.com](http://www.joyincare.com)



#### **Fabrikant:**

Confexion  
Amerikaweg 9, 9407 TJ Assen  
[www.confexion.com](http://www.confexion.com)



[www.joyincare.com](http://www.joyincare.com)

plezier in de zorg, **zorgen met plezier.**