

disposable tilbanden



handleiding disposable tilbanden

Deze handleiding is van toepassing op de onderstaande modellen

Tilbanden

Disposable tilband liggend tillen (8 en 10 lussen)

Disposable tilband zittend tillen



Waarschuwing! Lees de volledige instructie door voordat u het product in gebruik neemt. De tilband dient gebruikt te worden door een aantoonbaar bekwame zorgverlener met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

JOYinCARE

✉ info@joyincare.com

☎ 0341 - 768080

VERSIE

03-2023

Bedoeld gebruik

Deze handleiding heeft betrekking op de tilbanden van JOYinCARE. Een tilband is een niet-vormvaste lichaamsondersteuning en bedoeld om een cliënt met een beperkte mobiliteit kortdurend te tillen en/of te verplaatsen in combinatie met een personentilift. Gebruik van een tilband is uitsluitend bedoeld voor het tillen van slechts één persoon per transfer. Het label van de tilband indiceert, tenzij anders vermeld, altijd de buitenzijde van de tilband.

De disposable tilbanden zijn bedoeld om een cliënt in mobiliteitsklassen D en E in combinatie met een passieve of plafondtilift volledig te ondersteunen bij de transfer. De tilbanden zijn persoonsgebonden en bedoeld voor kortdurig gebruik van maximaal 2 weken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van overdraagbare besmettingen of ziekenhuisopname. De tilband dient weggegooid te worden bij zichtbare vervuiling, wanneer deze nat is geworden en/of niet meer nodig is. Het stevige materiaal scheurt niet direct wanneer dit vochtig wordt, waardoor de transfer veilig afgemaakt kan worden.

De Disposable tilband zittend tillen is bedoeld voor algemeen gebruik, waarbij de cliënt in een zittende houding getild wordt. De tilband houdt het zitvlak vrij, waardoor deze in de stoel aangebracht en weggehaald kan worden. Geadviseerd wordt om de tilband na de transfer weg te halen voor het comfort van de cliënt.

De Disposable tilband liggend tillen is bedoeld om de cliënt in een liggende positie te kunnen tillen en verplaatsen. De tilband dient gebruikt te worden in combinatie met een horizontaal tiljuk en kan alleen in een liggende houding worden aangebracht en weggehaald.

Certificering

Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, is een medisch hulpmiddel (klasse I) en wordt gefabriceerd en getest volgens NEN-EN-ISO 10535. De tilband voldoet aan MDR Verordening (EU) 2017/745 en heeft een CE-markering die is aangebracht op het label van de tilband. Aanpassingen en reparaties aan de tilband mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.



Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel, ongeacht de oorzaak, moet in overeenstemming met MDR Verordening (EU) 2017/745 zo spoedig mogelijk worden gemeld aan de fabrikant. Er is sprake van een ernstig incident wanneer een incident direct of indirect heeft geleid of had kunnen leiden tot:

1. Het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
2. Een de tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
3. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

Maximaal draaggewicht

Het maximale draaggewicht van de disposable tilbanden is afhankelijk van de uitvoering en maat.

Disposable tilband zittend tillen, Universele maat (Maat M t/m XL):	Max. 200 kg
Disposable tilband zittend tillen, Obese maat (Maat XXL t/m 3XL):	Max. 350 kg
Disposable tilband liggend tillen, Universele maat (Maat M t/m 3XL):	Max. 350 kg



Controleer vóór het gebruik van de tilband ook het maximale tilgewicht van de te gebruiken tilift en het juk. Indien de tilift of het juk een lager maximaal tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan het laagste maximale tilgewicht te houden.

Type tilbanden

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type band dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Deze handleiding heeft betrekking op de volgende modellen:



Disposable tilband zittend tillen

- Materiaal: Polipropyleen (non woven)
 Ophanging: - Careclips voor 4-puntsjuk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- en 4-puntsjuk met lus ophanging

De tilband heeft een doorlopende hoofdsteun (model van een Longseat verblijfsband) en een standaardmodel onderzijde. De hoofdsteun is niet voorzien van baleinen. De tilband is leverbaar in een universele en obese maat. De obese maat is alleen leverbaar met lussen voor 2-puntsjuk met lus ophanging. De tilbanden worden geleverd in een set van 10 stuks.



Disposable tilband liggend tillen (8 lussen)

- Materiaal: Polypropyleen (non woven)
 Ophanging: - Lussen voor 8-punts horizontaal tiljuk met lus ophanging

De tilband is bedoeld voor horizontale transfers om de cliënt van een liggende naar een liggende positie te tillen. Hierbij wordt het gehele lichaam van de client ondersteund en kan de tilband alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden. De tilband is voorzien van 8 lussen en dient gebruikt te worden in combinatie met een horizontaal tiljuk met 8 ophangpunten. De tilbanden worden geleverd in een set van 10 stuks.



Disposable tilband liggend tillen (10 lussen)

- Materiaal: Polypropyleen (non woven)
 Ophanging: - Lussen voor 10-punts horizontaal tiljuk met lus ophanging

De tilband is bedoeld voor horizontale transfers om de cliënt van een liggende naar een liggende positie te tillen. Hierbij wordt het gehele lichaam van de client ondersteund en kan de tilband alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden. De tilband is voorzien van 10 lussen en dient gebruikt te worden in combinatie met een horizontaal tiljuk met 10 ophangpunten. De tilbanden worden geleverd in een set van 10 stuks.



Maten tilbanden


De geschikte maat kan bepaald worden aan de hand van de tilbanden meetkaart. Iedere situatie blijft echter uniek. Neem bij vragen of twijfel en voor obese cliënten boven 200 kg altijd contact op met JOYinCARE. Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt en in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

cm \ kg	0 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80	80 - 90	90 - 100	100 - 110	110 - 120	120 - 140	140 - 160	160 - 180	180 - 200	200 - 350
0 - 100	XXS	XS	XS	XS															
100 - 110		XS	XS	XS															
110 - 115		XS	XS	XS															
115 - 120		XS	XS		S	S													
120 - 125		XS	XS	S	S	S													
125 - 130				S	S	S													
130 - 135				S	S	S													
135 - 140				S	S	S	M	M											
140 - 145				S	S		M	M											
145 - 150						M	M	M	L	L									
150 - 155						M	M	M	L	L					XXL	XXL	XXL	3XL	JIC
155 - 160						M	M	M	L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL	XXL	3XL	JIC
160 - 165						M	M		L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL		3XL	JIC
165 - 170							L	L	L	L	LL	LL	LL	LL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
170 - 175							L	L	L	L		XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
175 - 180							L	L	L	L		XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
180 - 185							L	L	L			XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
185 - 190										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
190 - 195										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC
195 - 200										XL	XL	XL	XL	XL	XXL	XXL	3XL	3XL	JIC

Tilband bevestiging

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personen tillift door middel van Careclips of lussen. Controleer voor gebruik alle clips of lussen op afwijkingen of gebreken. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

A) Door middel van clips

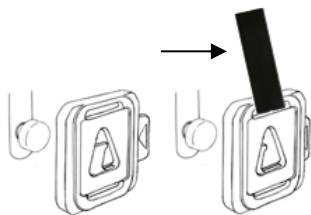

Aanbrengen van de Careclip: Zorg dat de spanning volledig van de clip af is. Druk het schuifje aan de zijkant van de clip volledig in en plaats de opening die nu ontstaat volledig over het paddestoeltje van het tiljuk. Laat het schuifje los. Het schuifje sluit de clip af en de clip is daarmee veilig geborgd op het paddestoeltje van het tiljuk. Bevestig altijd eerst de schouderclips en daarna de beenclips.


Verwijderen van de Careclip: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de clip af is, voordat de clip wordt verwijderd. Druk het schuifje volledig in en til de clip volledig over het paddestoeltje heen. Verwijder eerst de beenclips en daarna de schouderclips.



Controleer altijd voor het tillen of alle clips goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan het **handvat** van de clip (zie pijl) te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de clips nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle clips goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De Careclip is een universele veiligheidsclip welke veilig gebruikt kan worden in combinatie met een tillift met de volgende specificaties. De tillift dient uitgerust te zijn met paddestoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

B) Door middel van lussen

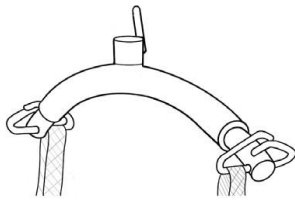

Aanbrengen van de lussen: Zorg dat de spanning volledig van de lus af is. Hang de lus over de haak van het tiljuk. Gebruik dezelfde lengte voor de lussen links en rechts van de tilband.

Verwijderen van de lussen: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de lus af is, voordat de lus wordt verwijderd. Til de lussen over de haken van de tilarm.




Controleer altijd voor het tillen of alle lussen goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan de lus te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de lussen nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle lussen goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke tillift uitgerust met een tiljuk met lus ophanging en het juiste aantal ophangpunten. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

Disposable tilband zittend tillen - aanbrengen in zitpositie

Bedoeld voor het tillen met een Disposable tilband zittend tillen.


1. Laat de cliënt iets naar voren buigen en breng de tilband achter de cliënt aan tot op de (rol)stoelzitting.
2. Haal de beenslips langs de benen naar voren.
3. Trek de tilband tot aan de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie duwen.
4. Haal de beenslips van buiten naar binnen onder de bovenbenen door.
5. Bij een tilband met lussen: de lussen van de beenslips door de eerste lus kruisen.
6. Bevestig nu de tilband aan het tiljuk en controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.

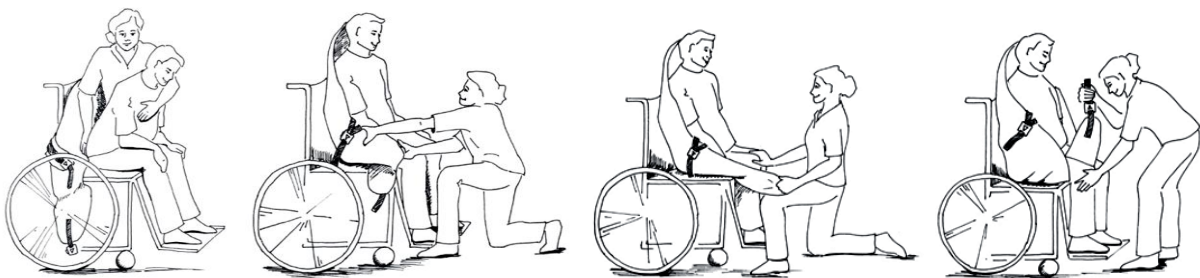

Disposable tilband zittend tillen - aanbrengen in ligpositie

Bedoeld voor het tillen met een disposable tilband zittend tillen.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Breng de tilband aan van kruin tot stuit. Breng daarna de beenslip en het schoudergedeelte onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam.
3. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het schoudergedeelte onder de cliënt uit.
4. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door.
5. Bij een tilband met lussen: de lussen van de beenslips door de eerste lus kruisen.
6. Bevestig de tilband aan het tiljuk en controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.

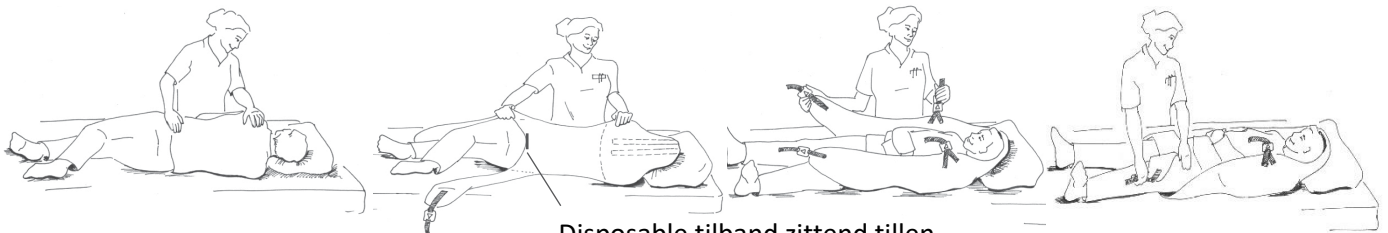

Disposable tilband zittend tillen

Disposable tilband liggend tillen - aanbrengen in ligpositie

Bedoeld voor het tillen met een Disposable tilband liggend tillen.

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Breng de tilband aan van kruin tot voeten, zie afbeelding. Breng daarna de beenslip en het schoudergedeelte onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam.
3. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het gedeelte bij de schouder onder de cliënt uit.
4. Controleer of de cliënt goed in het midden van de tilband en volledig op de tilband ligt.
5. Bevestig alle lussen aan het juiste ophangpunt van het tiljuk en controleer of alle lussen goed vastzitten.



Onderhoudsvorschriften

Een disposable tilband is een wegwerp tilband voor eenmalig of kortdurend gebruik. De te verwachten levensduur is maximaal 2 weken, maar is afhankelijk van de condities waaronder de tilband gebruikt wordt. Aanpassingen of reparaties anders dan door de fabrikant uitgevoerd, zorgen ervoor dat een tilband bij inspectie afgekeurd dient te worden.



De disposable tilband niet wassen in de wasmachine, handmatig wassen, drogen of strijken. De disposable tilband niet reinigen met ontsmettingsvloeistof of andere vloeistoffen. Indien de disposable tilband tijdens het gebruik vochtig wordt door bijvoorbeeld wondvocht, bloed of urine kan de transfer afgemaakt worden en dient de tilband daarna te worden vervangen.


Opslag

De disposable tilbanden worden per stuk verpakt en per set van 10 stuks geleverd. De tilbanden dienen te worden opgeborgen op een plaats waar geen direct zonlicht is en mogen niet onnodig belast worden. Let op voor scherpe voorwerpen.

Inspectie

Controleer de tilband en clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren, wijkende delen, (brand)gaten, losse stiksels, vuil of verkleuringen door bleken en leesbaarheid van het label.

Labels of tags ten behoeve van inspecties of gebruik mogen alleen worden bevestigd aan het handvat van de Careclip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband. Voor een tilband met lussen is dit toegestaan aan het tussenstuk van de middelste lus.



Controleer iedere tilband vóór elk gebruik. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik. Meer informatie over inspectie is te vinden op www.joyincare.com/downloads.

Tilband etiket



Raadpleeg de gebruiksaanwijzing



Waarschuwing



CE-marketing
Verordening (EU) 2017/745
Medische hulpmiddelen klasse I



Medisch hulpmiddel



Leverancier / distributeur



Fabrikant



Batchnummer



Serienummer



Beschermen tegen vocht



Niet wassen



Niet bleken met chloorbleekmiddel



Niet drogen in de droger



Niet strijken



Niet droog reinigen



Scan voor meer informatie over de tilbanden van JOYinCARE de QR code.

Garantie

Een disposable tilband wordt gezien als een hygiëneproduct en kan daardoor niet geruild worden. Voor elke geleverde tilband geldt een garantie op fabricagefouten tot het moment waarop de tilband in gebruik wordt genomen en maximaal 2 jaar na aanschaf. Verbeteringen, opmerkingen en aanbevelingen kunt u sturen naar: feedback@joyincare.com



Leverancier:

JOYinCARE
Industrieweg 47, 8071 CS Nunspeet
Tel 0341- 768080 info@joyincare.com
www.joyincare.com



Fabrikant:

Confexion
Amerikaweg 9, 9407 TJ Assen
www.confexion.com



www.joyincare.com

plezier in de zorg, **zorgen met plezier.**