

disposable slings



Instructions for use

Handleiding

This user manual applies to the following sling models

Slings

Disposable tilband liggend tillen (8 en 10 lussen)

Disposable tilband zittend tillen

JOYinCARE

✉ info@joyincare.com

☎ 0341 - 768080

VERSION

12-2023





JOYinCARE

Industrieweg 47
8071 CS Nunspeet
The Netherlands

+31 (0)341 76 80 80
info@joyincare.com
www.joyincare.com



Confexion

Amerikaweg 9
9407 TJ Assen
The Netherlands

www.confexion.com

Table of contents

Gebruikershandleiding Disposable tilbanden.....4

Inhoud: *Disposable tilband liggend tillen (8 en 10 lussen), Disposable tilband zitten tillen*



Waarschuwing! Lees de volledige instructie voordat u het product in gebruik neemt. De tilband dient gebruikt te worden door een aantoonbaar bekwame zorgverlener met adequate kennis over de uit te voeren handelingen. Neem bij vragen over het gebruik of de toepassing voor gebruik contact op met de leverancier.

1. Bedoeld gebruik

Deze handleiding heeft betrekking op de tilbanden van JOYinCARE. Een tilband is een niet-vormvaste lichaamsondersteuning en bedoeld om een cliënt met een beperkte mobiliteit kortdurend te tillen en/of te verplaatsen in combinatie met een persontillift. Gebruik van een tilband is uitsluitend bedoeld voor het tillen van slechts één persoon per transfer. Het label van de tilband indiceert, tenzij anders vermeld, altijd de buitenzijde van de tilband.

De disposable tilbanden zijn bedoeld om een cliënt in mobiliteitsklassen D en E in combinatie met een passieve of plafondtillift volledig te ondersteunen bij de transfer. De tilbanden zijn persoonsgebonden en bedoeld voor kortdurig gebruik van maximaal 2 weken, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van overdraagbare besmettingen of ziekenhuisopname. De tilband dient weggegooid te worden bij zichtbare vervuiling, wanneer deze nat is geworden en/of niet meer nodig is. Het stevige materiaal scheurt niet direct wanneer dit vochtig wordt, waardoor de transfer veilig afgemaakt kan worden.

2. Definities

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende definities gebruikt:

Disposable tilband zittend tillen: bedoeld voor algemeen gebruik, waarbij de cliënt in een zittende houding getild wordt. De tilband houdt het zitvlak vrij, waardoor deze in de stoel aangebracht en weggehaald kan worden. Geadviseerd wordt om de tilband na de transfer weg te halen voor het comfort van de cliënt.

Disposable tilband liggend tillen: bedoeld om de cliënt in een liggende positie te kunnen tillen en verplaatsen. De tilband dient gebruikt te worden in combinatie met een horizontaal tiljuk en kan alleen in een liggende houding worden aangebracht en weggehaald.

3. Certificering

Deze tilband, geleverd door JOYinCARE, is een medisch hulpmiddel (klasse I) en wordt gefabriceerd en getest volgens NEN-EN-ISO 10535. De tilband voldoet aan MDR Verordening (EU) 2017/745 en heeft een CE-markering die is aangebracht op het label van de tilband. Aanpassingen en reparaties aan de tilband mogen alleen worden uitgevoerd door de fabrikant.



Elk ernstig incident in verband met het hulpmiddel, ongeacht de oorzaak, moet in overeenstemming met MDR Verordening (EU) 2017/745 zo spoedig mogelijk worden gemeld aan zowel de fabrikant als de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Er is sprake van een ernstig incident wanneer een incident direct of indirect heeft geleid of had kunnen leiden tot:

1. Het overlijden van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
2. Een tijdelijke of blijvende ernstige verslechtering van de gezondheidstoestand van een patiënt, gebruiker of andere persoon,
3. Een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

4. Maximaal draaggewicht

Het maximale draaggewicht van de disposable tilbanden is afhankelijk van de uitvoering en maat.

| | |
|--|-------------|
| Disposable tilband zittend tillen, Universele maat (Maat M t/m XL): | Max. 200 kg |
| Disposable tilband zittend tillen, Obese maat (Maat XXL t/m 3XL): | Max. 350 kg |
| Disposable tilband liggend tillen, Universele maat (Maat M t/m 3XL): | Max. 350 kg |



Controleer vóór het gebruik van de tilband ook het maximale tilgewicht van de te gebruiken tillift en het juk. Indien de tillift of het juk een lager maximaal tilgewicht heeft dan de tilband, dient u zich aan het laagste maximale tilgewicht te houden.

5. Maten tilbanden


De geschikte maat kan bepaald worden aan de hand van de tilbanden meetkaart. Iedere situatie blijft echter uniek. Neem bij vragen of twijfel en voor obese cliënten boven 200 kg altijd contact op met JOYinCARE. Evalueer regelmatig of de maatvoering van de tilband past bij de cliënt en in ieder geval na elke lichamelijke verandering van de cliënt.

| cm \ kg | 0 - 20 | 20 - 25 | 25 - 30 | 30 - 35 | 35 - 40 | 40 - 45 | 45 - 50 | 50 - 60 | 60 - 70 | 70 - 80 | 80 - 90 | 90 - 100 | 100 - 110 | 110 - 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 200 | 200 - 350 |
|-----------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 0 - 100 | XXS | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 - 110 | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 - 115 | | XS | XS | XS | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 - 120 | | XS | XS | | S | S | | | | | | | | | | | | | |
| 120 - 125 | | XS | XS | | S | S | S | | | | | | | | | | | | |
| 125 - 130 | | | | | S | S | S | | | | | | | | | | | | |
| 130 - 135 | | | | | S | S | S | | | | | | | | | | | | |
| 135 - 140 | | | | | S | S | S | M | M | | | | | | | | | | |
| 140 - 145 | | | | | S | S | | M | M | | | | | | | | | | |
| 145 - 150 | | | | | | M | M | M | L | L | | | | | | | | | |
| 150 - 155 | | | | | | M | M | M | L | L | | | | | XXL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 155 - 160 | | | | | | M | M | M | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | XXL | 3XL | JIC |
| 160 - 165 | | | | | | M | M | | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | | 3XL | JIC |
| 165 - 170 | | | | | | L | L | L | L | L | LL | LL | LL | LL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 170 - 175 | | | | | | L | L | L | L | L | | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 175 - 180 | | | | | | L | L | L | L | L | | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 180 - 185 | | | | | | L | L | | L | | | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 185 - 190 | | | | | | | | | L | L | | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 190 - 195 | | | | | | | | | L | L | | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |
| 195 - 200 | | | | | | | | | L | L | | XL | XL | XL | XXL | XXL | 3XL | 3XL | JIC |

6. Tilband bevestiging

Een tilband kan uitsluitend bevestigd worden aan een tiljuk van een personentillift door middel van Careclips of lussen. Controleer voor gebruik alle clips of lussen op afwijkingen of gebreken. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

6.1 Door middel van clips

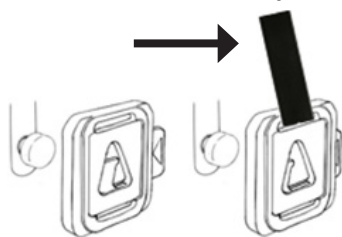

Aanbrengen van de Careclip: Zorg dat de spanning volledig van de clip af is. Druk het schuifje aan de zijkant van de clip volledig in en plaats de opening die nu ontstaat volledig over het paddestoeltje van het tiljuk. Laat het schuifje los. Het schuifje sluit de clip af en de clip is daarmee veilig geborgd op het paddestoeltje van het tiljuk. Bevestig altijd eerst de schouderclips en daarna de beenclips.


Verwijderen van de Careclip: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de clip af is, voordat de clip wordt verwijderd. Druk het schuifje volledig in en til de clip volledig over het paddestoeltje heen. Verwijder eerst de beenclips en daarna de schouderclips.



Controleer altijd voor het tillen of alle clips goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan het **handvat** van de clip (zie pijl) te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de clips nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle clips goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De Careclip is een universele veiligheidsclip welke veilig gebruikt kan worden in combinatie met een tillift met de volgende specificaties. De tillift dient uitgerust te zijn met paddenstoeltjes met een diameter van 6.8 mm tot en met 8.2 mm. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

6.2 Door middel van lussen

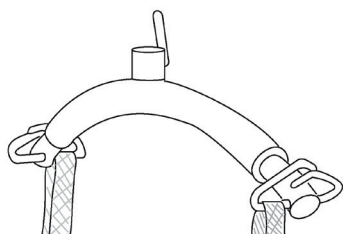

Aanbrengen van de lussen: Zorg dat de spanning volledig van de lus af is. Hang de lus over de haak van het tiljuk. Gebruik dezelfde lengte voor de lussen links en rechts van de tilband.

Verwijderen van de lussen: Zorg ervoor dat het gewicht van de cliënt volledig wordt ondersteund door het onderliggende oppervlak en de spanning volledig van de lus af is, voordat de lus wordt verwijderd. Til de lussen over de haken van de tilarm.



Controleer altijd voor het tillen of alle lussen goed zijn aangebracht door de bevestiging visueel te controleren en aan de lus te trekken. Breng het juk iets omhoog totdat er spanning op de tilband staat en controleer de lussen nogmaals. Til de cliënt pas verder omhoog wanneer alle lussen goed gecontroleerd zijn.

Conformiteit: De lussen aan de door JOYinCARE geleverde tilbanden kunnen veilig gebruikt worden in combinatie met elke tillift uitgerust met een tiljuk met lus ophanging en het juiste aantal ophangpunten. Voor een veilig gebruik van de tilband dient de gebruikte tillift ook gefabriceerd te zijn volgens NEN-EN-ISO 10535. Neem bij vragen over de compatibiliteit altijd contact op met JOYinCARE alvorens de combinatie te gebruiken.

7. Disposable tilband zittend tillen

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type band dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Voor de definitie van de Disposable tilband zittend tillen, zie hoofdstuk 2.

7.1 Disposable tilband zittend tillen – modellen

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de volgende modellen van de Disposable tilband zittend tillen:



Disposable tilband zittend tillen

Materiaal uitvoeringen: Polipropyleen (non woven)
 Ophanging:
 - Careclips voor 4-puntsjuk met clip ophanging
 - Lussen voor 2- en 4-puntsjuk met lus ophanging


De tilband heeft een doorlopende hoofdsteun (model van een Longseat verblijfsband) en een standaardmodel onderzijde. De hoofdsteun is niet voorzien van baleinen. De tilband is leverbaar in een universele en obese maat. De obese maat is alleen leverbaar met lussen voor 2-puntsjuk met lus ophanging. De tilbanden worden geleverd in een set van 10 stuks.



7.2 Disposable tilband zittend tillen aanbrengen in zitpositie


1. Laat de cliënt iets naar voren buigen en breng de tilband achter de cliënt aan tot op de (rol) stoelzitting.
2. Haal de beenslips langs de benen naar voren.
3. Trek de tilband tot aan de stuit van de cliënt door met één hand aan de beenslip te trekken en met de andere hand tegen de knie duwen.

4. Haal de beenslips van buiten naar binnen onder de bovenbenen door.
5. Bij een tilband met lussen: de lussen van de beenslips door de eerste lus kruisen.
6. Bevestig nu de tilband aan het tiljuk en controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.

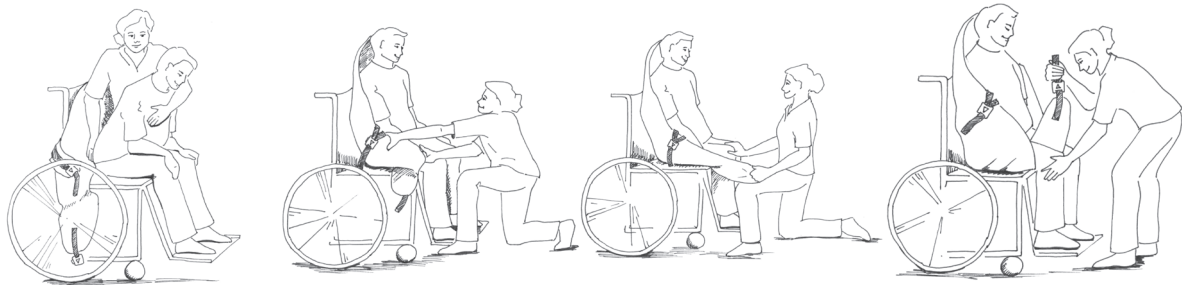

7.3 Disposable tilband zittend tillen - aanbrengen in ligpositie

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Breng de tilband aan van kruin tot stuit. Breng daarna de beenslip en het schoudergedeelte onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam.
3. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het schoudergedeelte onder de cliënt uit.
4. Haal de beenslips één voor één onder de bovenbenen door.
5. Bij een tilband met lussen: de lussen van de beenslips door de eerste lus kruisen.
6. Bevestig de tilband aan het tiljuk en controleer of alle clips of lussen goed vastzitten.

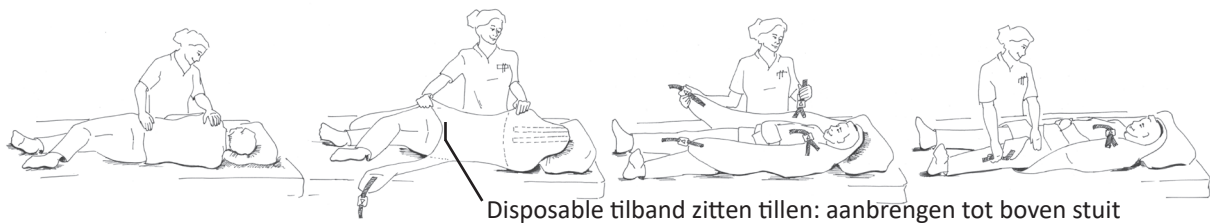

8. Disposable tilband liggend tillen

JOYinCARE heeft een uitgebreid assortiment tilbanden, passend bij de specifieke behoefte, indicatie en toepassing. Voor de indicering van het juiste type band dient een weloverwogen keuze gemaakt te worden. Voor de definitie van de Disposable tilband liggend tillen, zie hoofdstuk 2.

8.1 Disposable tilband liggend tillen – modellen

Dit hoofdstuk heeft betrekking op de volgende modellen van de Disposable tilband zittend tillen:



Disposable tilband liggend tillen (8 lussen)

Materiaal uitvoeringen: Polypropyleen (non woven)
 Ophanging: - Lussen voor 8-punts horizontaal tiljuk met lus ophanging

De tilband is bedoeld voor horizontale transfers om de cliënt van een liggende naar een liggende positie te tillen. Hierbij wordt het gehele lichaam van de client ondersteund en kan de tilband alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden. De tilband is voorzien van 8 lussen en dient gebruikt te worden in combinatie met een horizontaal tiljuk met 8 ophangpunten. De tilbanden worden geleverd in een set van 10 stuks.





Disposable tilband liggend tillen (10 lussen)

Materiaal uitvoeringen: Polypropyleen (non woven)
 Ophanging: - Lussen voor 8-punts horizontaal tiljuk met lusophanging

De tilband is bedoeld voor horizontale transfers om de cliënt van een liggende naar een liggende positie te tillen. Hierbij wordt het gehele lichaam van de cliënt ondersteund en kan de tilband alleen in een liggende houding aangebracht en weggehaald worden. De tilband is voorzien van 10 lussen en dient gebruikt te worden in combinatie met een horizontaal tiljuk met 10 ophangpunten. De tilbanden worden geleverd in een set van 10 stuks.



8.2 Disposable tilband liggend tillen - aanbrengen in ligpositie

1. Draai de cliënt op de zij. Leg de tilband achter de cliënt.
2. Breng de tilband aan van kruin tot voeten, zie afbeelding. Breng daarna de beenslip en het schoudergedeelte onder de cliënt door en duw de tilband een beetje onder het lichaam.
3. Draai de cliënt terug op de rug op de tilband. Trek de beenslip en het gedeelte bij de schouder onder de cliënt uit.
4. Controleer of de cliënt goed in het midden van de tilband en volledig op de tilband ligt.
5. Bevestig alle lussen aan het juiste ophangpunt van het tiljuk en controleer of alle lussen goed vastzitten.



9. Onderhoudsvoorschriften

Een disposable tilband is een wegwerp tilband voor eenmalig of kortdurend gebruik. De te verwachten levensduur is maximaal 2 weken, maar is afhankelijk van de condities waaronder de tilband gebruikt wordt. Aanpassingen of reparaties anders dan door de fabrikant uitgevoerd, zorgen ervoor dat een tilband bij inspectie afgekeurd dient te worden.



De disposable tilband niet wassen in de wasmachine, handmatig wassen, drogen of strijken. De disposable tilband niet reinigen met ontsmettingsvloeistof of andere vloeistoffen. Indien de disposable tilband tijdens het gebruik vochtig wordt door bijvoorbeeld wondvocht, bloed of urine kan de transfer afgemaakt worden en dient de tilband daarna te worden vervangen.

10. Opslag

De disposable tilbanden worden per stuk verpakt en per set van 10 stuks geleverd. De tilbanden dienen te worden opgeborgen op een plaats waar geen direct zonlicht is en mogen niet onnodig belast worden. Let op voor scherpe voorwerpen.

11. Inspectie

Controleer de tilband, clips of lussen vóór elk gebruik op scheuren, wijkende delen, (brand)gaten, losse stiksels, vuil of verkleuringen door bleken en de leesbaarheid van het label.

Labels of tags ten behoeve van inspecties of gebruik mogen alleen worden bevestigd aan het handvat van de Careclip. Dit handvat is aan het uiteinde van de clip bevestigd en is geen dragend onderdeel van de tilband. Voor een tilband met lussen is dit toegestaan aan het tussenstuk van de middelste lus.



Controleer iedere tilband vóór elk gebruik. Stel de tilband bij geconstateerde gebreken of enige twijfel direct buiten gebruik.

12. Tilband etiket



Raadpleed de
gebruiksaanwijzing



Normale was op maximaal 60 graden



Waarschuwing



Niet bleken met chloorbleekmiddel



CE-markering
Verordening (EU) 2017/745
Medische hulpmiddelen klasse I



Niet drogen in de droger



Medisch hulpmiddel



Niet strijken



Leverancier / distributeur



Niet droog reinigen



Fabrikant



Batchnummer



Serienummer

13. Garantie

Een disposable tilband wordt gezien als een hygiëneproduct en kan daardoor niet geruild worden. Voor elke geleverde tilband geldt een garantie op fabricagefouten tot het moment waarop de tilband in gebruik wordt genomen en maximaal 2 jaar na aanschaf. Voor verbeteringen, opmerkingen en aanbevelingen kunt u contact opnemen met de leverancier.



www.joyincare.com

JOYinCARE.